

beurer

HK Limited Edition



CS Vyhřevná poduška
Návod k použití





Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte také návod k použití.








Obsah

1. Obsah balení	3	4.4 Nastavení teploty	6
1.1 Popis zařízení	3	4.5 Funkce automatického vypnutí	6
2. Důležité pokyny		4.6 Vypnutí	6
Uschovejte pro pozdější použití	3	5. Čištění a údržba	6
3. Použití v souladu s určením.....	5	6. Uložení.....	7
4. Obsluha	6	7. Likvidace	7
4.1 Bezpečnost	6	8. Co dělat v případě problémů?	7
4.2 Uvedení do provozu.....	6	9. Technické údaje.....	7
4.3 Zapnutí.....	6	10. Záruka / servis.....	7

Vysvětlení symbolu

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	VAROVÁNÍ; Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.		
	POZOR; Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.		
	Upozornění; Upozornění na důležité informace.		
	Čtěte pokyny!		Nezapichujte do ní jehly!
	Nepoužívejte příkrývku složenou nebo shrnutou!		Nevhodné pro děti do tří let.
	Výrobce		
	Přístroj třídy ochrany 2		
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		
	Štítek pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka		
	Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.		
	Označení posouzení shody pro Spojené království		
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.		

	Kód výrobce pro výrobní data		
	Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Oeko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.		
	Maximální teplota praní 30 °C velmi jemné praní		Nežehlit
			Nebělit
	Nečistit chemicky		Nesušit v sušičce prádla (tumbler)


1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1 Výchřevná poduška
- 1 Vypínač
- 1 Návod k použití

1.1 Popis zařízení

1. Síťová zástrčka
2. Síťový kabel
3. Vypínač
4. Osvětlených teplotních stupňů
5. Posuvný spínač pro ZAP/VYP (ON/OFF) a teplotní stupně
6. Zástrčka

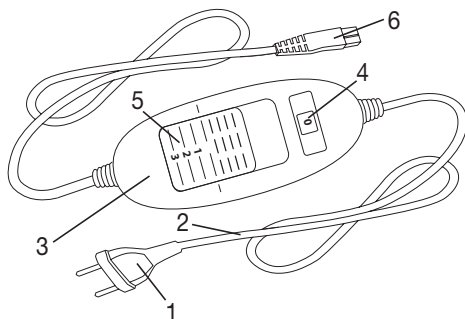

2. DŮLEŽITÉ POKYNY USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (úraz elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, ale i k ochraně produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a přiložte tento návod v případě předání výrobku dále.

- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišujících léků nebo po požití alkoholu).
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tato vyhřevná poduška smí být dětmi, které jsou starší než 3 roky, ale mladší než 8 let, používána pouze pod dozorem, přepínač přitom musí být nastaven na minimální teplotu.
- Tuto vyhřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhřevné podušky a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s vyhřevnou poduškou nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Tato vyhřevná poduška není určena pro použití v nemocnicích.
- Tato vyhřevná poduška je určena pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Do výrobku nepichujte žádné špendlíky!
- Nepoužívejte výrobek, jestliže je složený.
- Nepoužívejte výrobek, jste-li mokří.
- Tuto vyhřevnou podušku lze použít pouze ve spojení s přepínačem uvedeným na etiketě.
- Tato vyhřevná poduška se smí připojovat pouze k síťovému napětí uvedenému na etiketě.
- Jestliže budete vyhřevnou podušku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na vypínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z této vyhřevné podušky mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT. Před použitím této vyhřevné podušky se proto poradte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.
- Za kabely netahejte, nekroutěte s nimi nebo je nelámejte.

- Kabel a přepínač výhřevné podušky mohou při nevhodném uložení představovat nebezpečí z hlediska zachycení, zakopnutí, uškrcení nebo špatného došlápnutí. Uživatel musí obecně zajistit bezpečné umístění všech kabelů.
- Tuto výhřevnou podušku je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení. Pokud se takové známky objeví, výhřevná poduška nebyla správně používána a již se neohřívá, je třeba ji před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.
- V žádném případě nesmíte výhřevnou podušku (včetně příslušenství) otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit její správnou funkci. V případě nedodržení těchto pokynů záruka zaniká.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu výhřevné podušky, musíte ho vyřadit a odstranit. Pokud ho nelze odpojit, musíte vyřadit a odstranit celou výhřevnou podušku.
- Spínače a vedení nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Po zapnutí této výhřevné podušky se na ni nesmí pokládat
 - žádné předměty s ostrými hranami,
 - žádný zdroj tepla, např. ohřívací láhev, výhřevná poduška a podobně.
- Elektronické součástky v přepínači se při používání výhřevné podušky zahřívají. Přepínač proto nesmí být zakrytý nebo nesmí ležet na výhřevné podušce, pokud je tato zapnutá.
- Před uskladněním nechte výhřevnou podušku vychladnout. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Výhřevnou podušku nechejte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Věnujte pozornost pokynům uvedeným v následujících kapitolách: Obsluha, čištění a údržba, uložení.
- Během skladování na výhřevnou podušku nepokládejte žádné předměty, aby se nepoškodila.

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM



POZOR

Tato výhřevná poduška je určena pro zahřátí lidského těla.

4. OBSLUHA

4.1 Bezpečnost



POZOR

- Výchřevná poduška je vybavena BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Automatickým vypnutím zabraňuje tato technologie snímačů v případě závady přehřátí výchřevné podušky po celé ploše. Jestliže BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM vypne výchřevnou podušku, přestanou v zapnutém stavu svítit teplotní stupně.
- Respektujte prosím, že po závadě již výchřevnou podušku nelze z důvodu bezpečnosti používat a je nutno ji odeslat na uvedenou adresu servisu.
- Vadnou výchřevnou podušku v žádném případě nepřipojujte k jinému vypínači stejného typu. Bezpečnostní systém ve vypínači by rovněž aktivoval finální odpojení.


4.2 Uvedení do provozu



POZOR

Ujistěte se, že se výchřevná poduška při používání neshrnula a nevytvorily se záhyby.

- Nejdříve propojte vypínač s topným tělesem tak, že zásuvkovou spojku spojíte dohromady.
- Pak zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

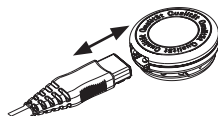

4.3 Zapnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně do polohy 1, 2 nebo 3, výchřevná poduška se zapne. V zapnutém stavu jsou teplotní stupně osvětlené.

4.4 Nastavení teploty

Stupeň 0: VYPNUTO

Stupeň 1: minimální teplo

Stupeň 2: střední teplo

Stupeň 3: maximální teplo



UPOZORNĚNÍ

- Nejrychlejšího zahřátí výchřevné podušky dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň.
- Tato výchřevná poduška je vybavena rychlou ohřívací jednotkou, která umožňuje rychlejší zahřátí podušky během prvních 10 minut.



VAROVÁNÍ

Jestliže budete výchřevnou podušku používat několik hodin, doporučujeme nastavit na vypínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí zahřáté části těla a následně případným popáleninám pokožky.

4.5 Funkce automatického vypnutí

Tato výchřevná poduška je vybavena funkcí automatického vypínání. Přívod tepla se přibližně 90 minut po zapnutí výchřevné podušky zastaví. Ukazatel teplotních stupňů začne blikat. Abyste opět mohli obnovit funkci výchřevné podušky, nastavte nejdříve posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně (5) na stupeň „0“ (VYPNUTO). Asi po 5 sekundách můžete podušku opět zapnout.



4.6 Vypnutí

Nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na stupeň „0“, výchřevná poduška se vypne. Teplotní stupně již nesvítlí.



UPOZORNĚNÍ

Jestliže nebudete výchřevnou podušku používat, nastavte posuvný spínač pro ZAP/VYP a teplotní stupně na stupeň „0“ (VYP) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím vypínač od výchřevné podušky.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pak odpojte zásuvkovou spojku a tím vypínač od výchřevné podušky. Inak by se mohla výchřevná poduška poškodit.



POZOR

Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Drobné znečištění výhřevné podušky můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.

POZOR

Respektujte, že se výhřevná poduška nesmí chemicky čistit, ždímat, mandlovat nebo žehlit. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.

- Tuto výhřevnou podušku lze prát v pračce.
- Na pračce nastavte šetrný prací program na 30 °C (praní na vlnu). Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.
- Nezapomeňte prosím, že příliš časté praní výhřevnou podušku velmi zatěžuje. Výhřevná poduška by se měla během celé své životnosti prát v pračce maximálně 10krát.
- Ihned po vyprání rozprostřete ještě vlhkou výhřevnou podušku na stojan na prádlo a nechte ji uschnout.

POZOR

- K připevnění výhřevné podušky nepoužívejte žádné količky na prádlo apod. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.
- Vypínač připojte k výhřevné podušce teprve když je zástrčková spojka a celá vyhřívací poduška zcela suchá. Jinak by se mohla výhřevná poduška poškodit.

VAROVÁNÍ

V žádném případě nezapínejte výhřevnou podušku proto, aby se vysušila! Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

6. ULOŽENÍ

Pokud nebudete výhřevnou podušku delší dobu používat, doporučujeme ji uskladnit v originálním obalu. Odpojte zásuvkovou spojku a tím i vypínač od výhřevné podušky.

7. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Příčina	Náprava
Teplotní stupně nesvítlí, zatímco <ul style="list-style-type: none"> • je vypínač řádně propojen s výhřevnou poduškou • je síťová zástrčka propojena s funkční zásuvkou • je posuvný spínač nastaven na stupeň 1, 2 nebo 3 	Bezpečnostní systém výhřevnou podušku nezvratně vypnul.	Zašlete výhřevnou podušku a vypínač do servisu.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Viz typový štítek na vyhřívané podušce

10. ZÁRUKA / SERVIS

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.

