

Bruksanvisning

1. Avsedd användning och indikation

Produkten är en medicinteknisk produkt för injektion i synovialleder (knä, höft, fotled och axel) i syfte att återställa de naturliga viskoelastiska egenskaperna hos ledvätskan (viskossupplementering). Den är indicerad för behandling av smärta och stelhet till följd av degenerativa eller traumatiske förändringar i synovialledsmembratet (artros).

2. Beskrivning

Produkten innehåller en steril, isoton, viskoelastisk lösning för intraartikulärt bruk och tillhållandehåll i en engångsspruta. En engångsspruta innehåller 2 ml viskoelastisk lösning. 1 ml av produkten innehåller 10 mg (1%) natriumhyaluronat tillsammans med natriumklorid, natriummonovätsfösfat, citronsyra och vatten för injektion. Produkten levereras steril och är endast avsedd för engångsbruk. Produktet har ångsteriliserats i sterillbarriär (blisterförpackning). Inga material av animaliskt ursprung används under tillverkningen av produkten eller som råmaterial. Inga läkemedel ingår i produktet.

3. Administrerings sätt och dosering

Tag ut engångssprutan ur sterillbarriären (blisterförpackning), avlägsna gummihåttan från Luer-Lock-adaptern genom att försiktigt vrida av den, sätt in lämplig kanyl och fäst den på plats genom att vrida försiktigt. Under administreringen ska sprutan hållas som visas i figur 1. Intraartikulära injektioner med lämplig kanyl måste utföras under strikt aseptiska förhållanden. Beroende på ledens storlek kan upp till 2 ml administreras intraartikulärt. För knäet rekommenderas tre till fem injektioner av produkten med veckolånga intervall. I höft, fotled och axel kan en till fem injektioner ges och antalet ska väljas utifrån klinisk erfarenhet och den lindring patienterna upplever. Flera leder kan behandlas samtidigt. Behandlingscyklerna kan upprepas efter flera månader. Efter administrering av produkten rekommenderas att en ispåse placeras på den behandlade leden under 5-10 minuter för att motverka smärta och svullnad.

4. Effekt och verknings sätt

Hos patienter med degenerativ leddsjukdom (artros) är viskoelastisiteten hos ledvätskan påtagligt försämrad. Detta orsakar mekanisk påfrestning på leden och leder till nedbrytning av ledrosket, vilket resulterar i begränsade och smärtsamma rörelser i leden. Produktet ger tillfällig lindring av smärta och stelhet (begränsad rörlighet) orsakad av degenerativa eller posttraumatiske förändringar i synoviallederna.

5. Kontraindikationer och möjliga interaktioner

Produkten är kontraindicerad hos patienter med känd överkänslighet mot någon av dess komponenter samt vid bakteriell artit. Det finns för närvarande ingen information om negativa interaktioner med andra intraartikulära behandlingar.

6. Biverkningar och oönskade händelser

Efter intraartikulär injektion kan patienten uppleva lokala symtom i den behandlade leden (rodnad, smärta, värmeökning och svullnad). Följande oönskade händelser har rapporterats för liknande produkter: lindrig eller måttlig artalgi, i sällsynta fall hudutslag, aseptisk utgjutning i leden, pruritus (klåda) och muskelspasmer. Ytterligare oönskade händelser som har observerats i mycket sällsynta fall är: allergiska reaktioner, anafylaktisk chock, hemartros, flebit, pseudosepsis, allvarlig akut inflammatorisk reaktion (severe acute inflammatory reaction, SAIR), ledstelhet, tendinit, bursit, feber och myalgia.

7. Varningar

Produkten ska endast administreras av läkare som utbildats att ge intraartikulära injektioner. Läkaren måste också vara förtrogen med alla immunologiska och övriga risker i samband med användning av biologiskt material. Produktet har inte prövats på gravida kvinnor eller barn under 18 års ålder. Produkten ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Produktet är avsedd för engångsbruk och injektions-sprutan får under inga omständigheter omsteriliseras. Återanvändning av produkten innebär en infektionsrisk för patienter eller användare. Får ej användas om sterillbarriären (blisterförpackning) har öppnats och/eller skadats. Injektions-sprutan får ej användas om tophyllan har öppnats eller förflyttats i sterillbarriären (blisterförpackning). Får ej administreras efter utgångsdatum. Patienter ska rekommenderas relativ vila (men inte immobilisering) i 24 timmar efter varje injektion för att undvika påfrestning på behandlade lederna.

8. Förvaring

Produkten ska förvaras vid rumstemperatur (2-25°C/36-77°F) och skyddad mot kyla och fukt. Tillgängliga förpackningsstorlekar: 1, 3, 5 eller 50 engångssprutor

9. Senast reviderad

2018-11

Bruksanvisning

1. Tiltent knb og indikasjon

Produktet er medisinsk utstyr som brukes på mennesker i forbindelse med injeksjon i synovialledd (kne, hofte, ankel og skulder) for å gjenopprette de naturlige viskoelastiske egenskapene til synovialvæsken (viskossupplementasjon). Det er indisert for behandling av smerter og begrenset bevegelse som følge av degenerative eller traumatiske endringer i synovialleddområdet (osteoartritt).

2. Beskrivelse

Produktet består av en steril, isoton, viskoelastisk løsning for intraartikulær bruk, levert i en bruksklar sprøyte. En bruksklar sprøyte inneholder 2 ml av den viskoelastiske løsningen. 1 ml av produktet inneholder 10 mg (1%) natriumhyaluronat i tillegg til natriumklorid, natriummonohydrogenfosfat, sitronsyre og vann til injeksjon. Produktet leveres steril og er kun beregnet til engangsbruk. Produktet er dampsterilisert i blisterpakninger. Det er ikke brukt materialer av animalsk opprinnelse under produksjon av produktet eller som råmaterialer. Det er ingen legemidler integrert i produktet.

3. Administrasjonsmåte og dosering

Tag ut engångssprutan ur sterillbarriären (blisterförpackning), avlägsna gummihåttan från Luer-Lock-adaptern ved å vri forsiktig, sett på en egnet kanyl och läs den på plass ved å vri forsiktig. Under administrasjon skal sprøyten holdes som vist i figur 1. Det er viktig å bruke aseptisk injeksjonsteknikk ved intraartikulære injeksjoner. Avhengig av størrelsen på leddet kan opptil 2 ml administreres intraartiku-lært. I knøet anbefales tre til fem injeksjoner av produktet med ukentlige intervaller. I hofte, ankelen og skulderen kan antallet injeksjoner variere fra én til fem, basert på klinisk erfaring og lindringen pasientene opplever. Flere ledd kan behandles samtidig, og behandlingssyklu-sene kan gjentas etter flere måneder. Etter administrasjon av produktet anbefales det å plassere en ispose på leddet i 5-10 minutter.

4. Effekt og virkemåte

Hos pasienter med degenerativ leddsykdom (osteoartritt) er viskoelastisiteten til synovialvæsken betydelig redusert. Dette fører til meka-nisk belastning på leddet, slik at leddbrusen brytes ned og leddbevegelsen blir begrenset og smertefull. Produktet gir midlertidig lindring av smerte og stivhet (begrenset mobilitet) som skyldes degenerative eller traumatiske endringer i synovialleddområdet.

5. Kontraindikasjoner og mulige interaksjoner

Produktet er kontraindisert til pasienter med kjent overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene eller ved bakteriell arttritt. For øyeblikket foreligger det ingen informasjon om uheldige interaksjoner med andre intraartikulære behandlingar.

6. Bivirkninger og komplikasjoner

Efter intraartikulær administrasjon kan pasientene få lokale symptomer i leddet som behandles (rødhet, smerte, varmefølelse og hevelse). Følgende bivirkninger er observert etter behandling med lignende produkter: mild eller moderat artalgi, i sjeldne tilfeller hudutslett, aseptisk væske i ledd, pruritus (kløe) og muskelkramper. Andre bivirkninger som er observert i svært sjeldne tilfeller, er allergiske reaksjo-ner, anafylaktisk sjokk, hemartrose, flebitt, pseudosepsis, alvorlig akutt inflammasjonsreaksjon (SAIR), leddstivhet, tendonitt, bursitt, feber og myalgia.

7. Advarsler

Produktet skal kun administreres av en lege som har fått opplæring i å sette intraartikulære injeksjoner. Han eller hun skal også være kjent med alle immunologiske og andre potensielle risikofaktorer forbundet med bruk av biologisk materiale. Produktet er ikke testet på gravide kvinner og barn under 18 år. Produkten ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Produktet är avsedd för engångsbruk och injektions-sprutan får under inga omständigheter omsteriliseras. Återanvändning av produkten innebär en infektionsrisk för patienter eller användare. Får ej användas om sterillbarriären (blisterförpackning) har öppnats och/eller skadats. Injektions-sprutan får ej användas om tophyllan har öppnats eller förflyttats i sterillbarriären (blisterförpackning). Får ej administreras efter utgångsdatum. Patienter ska rekommenderas relativ vila (men inte immobilisering) i 24 timmar efter varje injektion för att undvika påfrestning på behandlade lederna.

8. Oppbevaring

Produktet skal oppbevares ved romtemperatur (2-25 °C / 36-77 °F) og beskyttes mot frost og fuktighet. Tilgjengelige pakningsstørrelser: 1, 3, 5 eller 50 engangssprøyt

9. Sist revidert

2018-11

Uputstvo za upotrebu

1. Namen i indikacije

Ovaj proizvod je medicinsko sredstvo namenjeno za humanu upotrebu, ubrizgavanjem u sinovijalne zglobove (koleno, kuk, skočni zglob i rame) sa ciljem da obnovi prirodna viskoelastična svojstva sinovijalne tečnosti (viskossuplementacija). Indikovao je za lečenje bola i ograničenih pokreta koji su posledica degenerativnih ili traumatskih promena u sinovijalnom području zgloba (osteoartritis).

2. Opis

Sterilan, izotoničan, viskoelastični rastvor za intraartikularnu primenu, u špricu. Pripremljen špric sadrži 2 ml viskoelastičnog rastvora. 1 ml sadrži 10 mg (1%) natrijum-hijaluronata sa natrijum-hloridom, natrijum-monohidrogenofosfatom, limunskom kiselinom i vodom za injek-cije. Proizvod je sterilan i namenjen je za jednokratnu upotrebu. Proizvod je sterilisan u blister pakovanju primenom pare (sterilna barijera). Nisu upotrebljavane materije životinjskog porekla u toku proizvodnje niti kao polazne sirovine. Proizvod ne sadrži lekove.

3. Način primene i doziranje

Izvadite već napunjen špric iz blister pakovanja, pažljivo odvrnite gumeni zatvarač sa "Luer-Lock" adaptera, spojite odgovarajuću iglu i okretanjem je učvrstite. U toku davanja injekcije, špric treba držati kako je prikazano na slici 1. Intraartikularno davanje injekcije sa odgovarajućom iglom se mora izvoditi pod strogo aseptičnim uslovima. Zavisno od veličine zgloba, može se aplikovati do 2 ml. Za koleno se preporučuje tri do pet injekcija u nedeljnim intervalima. Za kuk, skočni zglob i rame, broj injekcija može biti od jedne do pet, zavisno od kliničkog iskustva i olakšanja bola kod pacijenta. Istovremeno se može tretirati više zglobova. Ciklus lečenja se mogu ponoviti nakon nekoliko meseci. Posle ubrizgavanja preporučuje se stavljanje ledenih obloga na tretirani zglob, u trajanju od 5-10 minuta.

4. Učinak i način delovanja

Kod pacijenata sa degenerativnom bolešću zglobova (osteoartritis), viskoelastičnost sinovijalne tečnosti je značajno poremećena. Ovo uzrokuje mehanički pritisak na zglobov i dovodi do oštećenja zglobne hrskavice, a posledica su ograničeni i bolni pokreti zglobova. Lubrikantna svojstva ovog proizvoda, kao i svojstva da apsorbuje udare, pomažu ublažavanju bola i poboljšavaju pokretljivost zglobova.

5. Kontraindikacije i moguće interakcije

Sredstvo se ne sme primeniti kod pacijenta za koga je poznato da je preosetljiv na neki od sastojaka ili u kod bakterijskog artritisa. Nisu poznate neželjene interakcije sa drugim intraartikularnim tretmanima.

6. Neželjena dejstva i neželjeni događaji

Posle primene kod pacijenata mogu se javiti lokalni simptomi u tretiranom zglobov (bol, osećaj toplote, crvenilo ili oticanje). Postoje podaci o sledećim neželjenim događajima posle primene sledećih sredstava: blaga do umerena artalgiya, retko osp kože, aseptični izliv u zglob, pruritus i mišićni grč. Sledeći neželjeni događaji opaženi su veoma retko: alergijske reakcije, anafilaktički šok, hemartroza, flebitis, pseudo-sepsa, ozbiljna akutna inflamatorna reakcija, nazofaringitis, ukočenost zglobova, tendonitis, burzitis, povišena temperatura i mijalgija.

7. Upozorenja

Ovo sredstvo može primeniti isključivo lekar koji je obučen za intraartikularnu primenu. Lekar treba da bude upoznat sa potencijalnim imunološkim rizicima, kao i rizicima povezanim sa primenom bioloških materija. Sredstvo nije ispitano na trudnicama niti na deci ispod 18 godina. Držati van domašaja i vidokruga dece! Sredstvo je nameneno za jednokratnu primenu i špric se ne sme ponovo sterilisati posle upotrebe. Ponovna upotreba šprica predstavljala bi potencijalni rizik od infekcije i za pacijenta i za korisnika. Ne upotrebljavati ukoliko je sterilno pakovanje (blister) otvoreno ili oštećeno. Ne upotrebljavati špric ukoliko je skrućena kapica sa vrha u sterilnom pakovanju (blisteru). Ne upotrebljavati posle isteka roka upotrebe. Pacijenta treba savetovati da se odmara (ali ne da bude potpuno nepokretan) u sledećih 24 sata posle injekcije, da bi se izbeglo naprezanje tretiranog zglobova.

8. Čuvanje

Čuvati na sobnoj temperaturi (2-25°C/ 36-77°F) i zaštićiti od smrzavanja i vlage. Pakovanje: 1, 3, 5 ili 50 napunjenih šprica za jednokratnu upotrebu.

9. Poslednja revizija teksta uputstva

2018-11

Ovlašteni predstavnici proizvođača:

PharmaSwiss d.o.o.,
Batajinski drum 5a,
11080 Beograd

Broj i datum Rešenja:

515-02-03243-18-001 od 23.01.2019.

Instrukcja stosowania

1. Przeznaczenie wyrobu i wskazania

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do wykonywania iniekcji do stawów maziówkowych (kolanowy, biodrowy, skokowo-goleniowy, barkowy) w celu przywrócenia naturalnej viskoelastyczności maziówek stawowych (viskossuplementacja). Jest on wskazany w leczeniu bólu i ograniczonej ruchomości stawu powstałych w wyniku zmian zwyrodnieniowych lub pourazowych w obrębie stawu maziówkowego (osteoartroza).

2. Opis

Produkt zawiera sterylny, izotoniczny, viskoelastyczny roztwór do stosowania wewnątrzstawowego dostarczany w formie gotowej do użycia strzykawki. Jedna gotowa do użycia strzykawka zawiera 2 ml roztworu viskoelastycznego. 1 ml produktu zawiera 10 mg (1%) hialuronianu sodu oraz chlorek sodu, wodorofosforan sodu, kwas cytrynowy i wodę do wstrzykiwań. Produkt jest dostarczany w stanie jałowym i przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Produkt jest sterylizowany przy użyciu pary wodnej w sterylnej osłonie (blister). W procesie produkcji wyrobu nie stosuje się materiałów pochodzenia zwierzęcego, dotyczy to również surowców. Produkt nie zawiera leków.

3. Sposób podawania i dawka

Gotową do użycia strzykawkę należy wyjąć z sterylnej osłony (blister), zdjąć gumową zatyczkę z nasadki typu Luer-Lock, przekraczając ją delikatnie, a następnie podłączyć odpowiednią kaniulę i zaobkować ostrożnie. W czasie podawania należy trzymać strzykawkę w taki sposób, jak pokazano na rysunku 1. Podanie dawki powinno być przeprowadzone w ściśle aseptycznych warunkach. Objętość wstrzyknięcia zależy od wielkości stawu – maksymalnie 2 ml. W przypadku stawu kolanowego zaleca się trzy do pięciu iniekcji produktu z zachowaniem tygodniowych odstępów. W przypadku stawu biodrowego, skokowo-goleniowego i barkowego ilość iniekcji może wynosić od jednej do pięciu, w zależności od doświadczenia klinicznego i samopoczucia pacjenta. Można leczyć kilka stawów jednocześnie. Można powtarzać cykl leczenia po kilku miesiącach. Po wstrzyknięciu, zaleca się zastosowanie okładu z lodu na leczonym stawie przez 5-10 minut.

4. Mechanizm działania i skuteczność

U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów (osteoartroza) viskoelastyczność maziówek stawowych jest znacznie upośledzona. Powoduje to mechaniczne obciążenie stawu i prowadzi do zaniku chrząstki stawowej, co skutkuje ograniczeniem ruchomości i bólem stawów podczas ruchu. Produkt przynosi czasową ulgę w bólu i ograniczeniu ruchomości, które wynikają ze zmian zwyrodnieniowych i pourazowych w stawach maziówkowych.

5. Przeciwwskazania i możliwe interakcje

Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników oraz w przypadku bakteryjnego zapalenia stawów. Aktualnie nie ma informacji o niekorzystnych interakcjach z innymi terapiami wewnątrzstawowymi.

6. Reakcje i działania niepożądane

Po podaniu dostawowym pacjenci mogą odczuwać miejscowe dolegliwości w leczonym stawie (zaczzerwienienie, ból, uczucie ciepła i obrzęk). Podczas leczenia podobnymi produktami zaobserwowano następujące działania niepożądane: łagodne lub umiarkowane bóle stawów, w rzadkich przypadkach wysypka, aseptyczny wysięk, wstrząs i skurcze mięśni. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano następujące działania niepożądane: reakcje alergiczne, występowanie anafilaktycznej, wylew krwi do stawów, zapalenie żył, posocznica rzekoma, ciężka ostra reakcja zapalna (SAIR), ztywność stawów, zapalenie ścięgna, zapalenie torebki stawowej, gorączka i ból mięśni.

7. Ostrzeżenia

Produkt może być podawany jedynie przez lekarza przeszkolonego w wykonywaniu iniekcji dostawowych. Lekarz stosujący ten produkt powinien także mieć świadomość wszystkich zagrożeń immunologicznych i innych potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem materiału biologicznego. Produkt nie był badany u kobiet w ciąży ani u dzieci poniżej 18 roku życia. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niedostępnym dla dzieci. Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użyciu i strzykawka nie może być sterylizowana ponownie. Ponowne stosowanie produktu stanowi potencjalne zagrożenie pacjentów lub użytkowników. Nie stosować, jeśli sterylna osłona (blister) została otwarta i (lub) uszkodzona. Nie używać strzykawki, jeśli jej nasadka ochronna została wcześniej otwarta lub przesunięta w sterylnej osłonie (blistrze). Nie należy stosować produktu po upływie daty ważności. Należy poinformować pacjenta o konieczności względnego odpoczynku (ale bez unieruchomienia) przez 24 godziny po dokonaniu każdej iniekcji, w celu uniknięcia naprężeń w leczonych stawach.

8. Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej (2-25°C/36-77°F) i chronić przed mrozem i wilgocią. Dostępne opakowania: 1, 3, 5, lub 50 strzykawkę gotowych do użycia.

9. Data ostatniej aktualizacji

2018-11

Instrucțiuni de utilizare

1. Scopul utilizării și indicații

Produsul este un dispozitiv medical utilizat pentru injectare în articulațiile sinoviale (genunchi, sold, gleznă și umăr), pentru a restabili proprietățile viscoelastice naturale ale lichidului sinovial (văscosuplementare). Este indicat pentru tratamentul durerii și rigidității datorate modificărilor degenerative sau post-traumatice la nivelul articulațiilor sinoviale (osteoartrită).

2. Descriere

Produsul constă într-o soluție sterilă, izotonică, viscoelastică, pentru utilizare intraarticulară, disponibilă într-o seringă gata de utilizare. O seringă gata de utilizare conține 2 ml de soluție viscoelastică. 1 ml produs conține 10 mg (1%) hialuronat de sodiu și clorură de sodiu, monohidrogenofosfat de sodiu, acid citric și apă pentru preparate injectabile. Produsul este steril și doar pentru unică folosință. Produsul este sterilizat prin utilizarea de abur în interiorul ambalajului steril (blisterului). Nu sunt utilizate materiale de origine animală în cursul fabricației produsului sau ca materie primă. În produs nu sunt incluse preparate farmaceutice.

3. Mod de administrare și doze

Se scoate seringă gata de utilizare din ambalajul steril (blister), se îndepărtează capacul din cauciuc de pe adaptorul Luer-Lock prin răscucire ușoară, se atachează o canulă adecvată și se fixează răscucind cu atenție. În timpul administrării, seringă trebuie ținută după cum se arată în imaginea 1. Injecția intraarticulară utilizând canulă adecvată trebuie efectuată în condiții strict aseptice. Cantitatea de lichid injectată depinde de dimensiunea articulației – maxim 2 ml. La nivelul genunchiului se recomandă administrarea a trei până la cinci injecții de produs la intervale de o săptămână. La nivelul soldului, glezei și umărului, numărul de injecții poate fi cuprins între una și cinci și trebuie stabilit în funcție de experiența clinică și ameliorarea simțită de către pacienți. Mai multe articulații pot fi tratate simultan. Ciclurile de tratament pot fi repetate după câteva luni. Se recomandă aplicarea unei comprese cu gheață pe articulația tratată timp de 5-10 minute după injecție.

4. Eficiență și mod de acțiune

La pacienții cu afecțiuni degenerative ale articulațiilor (osteoartrită), viscoelasticitatea lichidului sinovial este afectată considerabil. Aceasta determină suprasolicitarrea mecanică a articulației și dă naștere distrugerii cartilajului articular, având ca urmare o mobilitate limitată și însoțită de dureri ale articulației. Produsul aduce ameliorare temporară a durerii și rigidității (mobilitate limitată) datorate modificărilor degenerative sau post-traumatice ale articulațiilor sinoviale.

5. Contraindicații și interacțiuni posibile

Produsul este contraindicat pacienților cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre substanțele conținute sau în caz de artrită de origine bacteriană. Până în prezent nu există informații despre interacțiuni adverse cu alte terapii cu administrare intraarticulară.

6. Reacții adverse și efecte adverse

Pacienții pot prezenta simptome locale la nivelul articulației tratate (înroșire, durere, senzație de căldură și tumefacție) după administrarea inecției intraarticulare. În cazul unor produse similare, au fost raportate următoarele reacții adverse: artalgie ușoară sau moderată, în cazuri rare erupție cutanată, exudat articular aseptice, prurit (mâncărime) și crampe musculare. Alte reacții adverse, care au fost observate în cazuri foarte rare, sunt: reacții alergice, soc anafilactic, hemartroză, flebită, pseudosepsis, reacție inflamatorie acută severă (RIAS), rigiditate articulară, tendinită, bursită, febră și mialgie.

7. Avertizări

Produsul trebuie administrat numai de către un medic instruit în efectuarea injecțiilor intraarticulare. De asemenea, acesta trebuie să cunoască toate riscurile imunologice și de altă natură care pot fi asociate cu utilizarea materialelor biologice. Produsul nu a fost testat la femeile gravide și copii și adolescenții cu vârsta sub 18 ani. A nu se lăsa produsul la vederea și îndemăna copiilor. Produsul este destinat pentru o singură utilizare, iar seringa nu trebuie reutilizată în niciun caz. Reutilizarea produsului creează un risc potențial de infecții pentru pacienți sau utilizatori. Nu utilizați dacă ambalajul steril (blisterul) a fost deschis și/sau este deteriorat. Nu utilizați o seringă al cărei capac al vârfului a fost deschis sau s-a deplasat în interiorul ambalajului steril (blisterului). A nu se administra după data de expirare. Pentru a evita solicitarea excesivă a articulațiilor tratate, pacienții trebuie sfătuiți să practice repausul relativ (nu imobilizare) timp de 24 de ore după fiecare injecție.


8. Păstrare

Produsul trebuie păstrat la temperatura camerei (2-25°C/36-77°F) și ferit de ighet și umiditate. Mărim de ambalaj disponibile: 1, 3, 5 sau 50 seringi gata de utilizare

9. Ultima revizuire

2018-11

Abbildung 1 | Figure 1 | Figure 1 | Figura 1 | Figura 1 | Figura 1 | Afbeelding 1 | Kuva 1 | Figur 1 | Figur 1 | Slika 1 | Rycina 1 | Imaginea 1

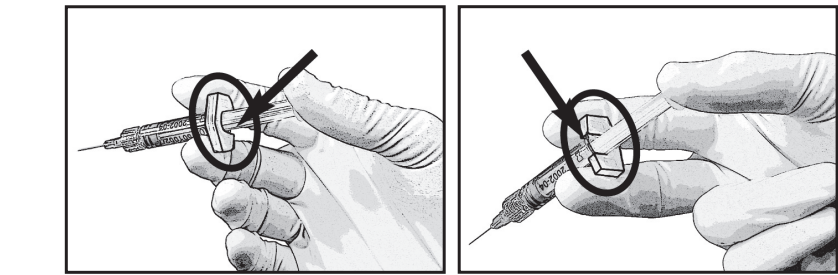

de RICHTIG! (weil Backstop-Öffnung hinten)
en RIGHT! (because backstop opening at back)
fr CORRECT! (l'ouverture du système anti-retour est à l'arrière)
it ICORRECTO! (apertura antiretroceso hacia atrás)
pt CORRECTO! (abertura do dispositivo de retenção e dietro)
nl GOED! (de backstop-opening bevindt zich aan de achterkant)

fi OIKEIN! (rajottimen aukko on takana)
sv RÄTT! (backstopöppningen bakåt)
no RIKTIG! (Åpningen i fingergrepet er på baksiden)
sr ISPRAVNO! (otvor "back stop" je pozadi)
pl POPRAWNIE! (ponieważ otwór ogranicznika końcowego znajduje się z tyłu)


ro CORECT! (deoarece deschizătura opritorului pistonului se află în spate)

FALSCH! (weil Backstop-Öffnung vorne)
en WRONG! (because backstop opening at front)
fr INCORRECT! (l'ouverture du système anti-retour est à l'avant)
it INCORRECTO! (apertura antiretroceso hacia delante)
pt SBAGLIATO! (abertura do sistema antirretorno é davanti)
nl ERRADO! (de backstop-opening bevindt zich aan de voorkant)

fi VÄÄRIN! (rajottimen aukko on edessä)
sv FELT! (backstopöppningen framåt)
no FEIL! (Åpningen i fingergrepet er på forsiden)
sr POGREŠNO! (otvor "back stop" je napred)
pl NIEPOPRAWNIE! (ponieważ otwór ogranicznika końcowego znajduje się z przodu)

ro GREȘIT! (deoarece deschizătura opritorului pistonului se află în față)

Erläuterung der internationalen Symbole | Explanation of international symbols | Explication des symboles internationaux | Explicación de los símbolos internacionales | Spiegazione dei simboli internazionali | Explicação dos símbolos internacionais | Verklaring van internationale symbolen | Kansainvälisten merkkin selitykset | Förklaring av de internationella symbolerna | Symbolforklaring | Objašnjenje međunarodnih simbola | Objaśnienie symboli międzynarodowych | Legenda simbolurilor internaționale

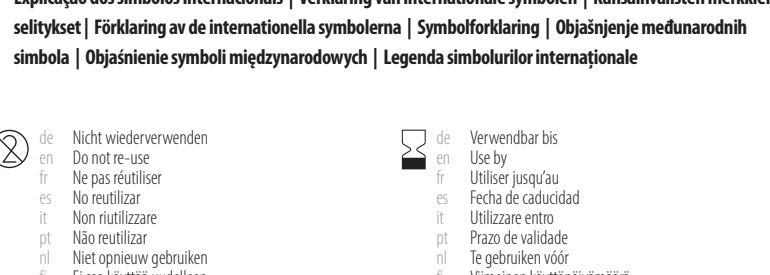

de Nicht wiederverwenden
en Do not re-use
fr Ne pas réutiliser
it Non riutilizzare
pt Não reutilizar
nl Niet opnieuw gebruiken
fi Ei saa käyttää uudelleen
sv Får ej återanvändas
no Må ikke brukes flere ganger
sr Ne upotrebljavati ponovo
pl Nie stosować ponownie
ro A nu se refolosi

de Chargennummer
en Batch number
fr Numéro de lot
es Lote
it Numero di lotto
pt Número de lote
nl Partijnummer
fi Eränumero
sv Satsnummer
no Partinummer
sr Serija
pl Numer partii
ro Numărul lotului

de Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
en Do not use if package is damaged
fr Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
es No utilizar si el envase está dañado
it Non utilizzare se il confezionamento è danneggiato
pt Não utilizar se a embalagem estiver danificada
nl Niet gebruiken bij beschadiging van de verpakking
fi Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
sv Använd ej om förpackningen är skadad
no Må ikke brukes hvis emballasjonen er skadet
sr Ne upotrebljavati ako je pakovanje oštećeno
pl Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone
ro A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat

de Gebrauchsanweisung beachten
en Consult instructions for use
fr Consulter la notice d'instructions
es Consulte las instrucciones de uso
it Consultare le istruzioni per l'uso
pt Consulte as instruções de utilização
nl Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
fi Tutustu käyttöohjeeseen
sv Läs bruksanvisningen
no Se bruksanvisningen
sr Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu
pl Zapoznaj się z instrukcją stosowania
ro Consultați instrucțiunile de utilizare

de Sterilisiert
en Sterilized using steam
fr Méthode de stérilisation utilisant la vapeur
es Esterilizado mediante vapor
it Sterilizzato mediante vapore
pt Esterilizado por vapor
nl Gesteriliseerd door stoom
fi Höyrysteriloitu
sv Steriliserad med ånga
it Fabricante
fr Fabricante
es Fabricante
nl Fabricante
fi Valmistaja
sv Tillverk