




Lomatuell® Pro

Gelbildendes Kontaktnetz

350 Effective (geltend) - AnjaFuc1 / 06/21/2018 11:28:16

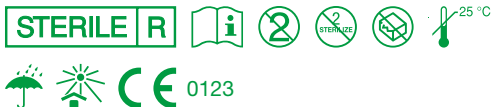

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com

4031912/2018-06

Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:

Lomatuell® Pro ist eine nicht klebende Wundauflage. Diese besteht aus einem synthetischen Gittertüll, imprägniert mit einer fett- und hydrokolloidhaltigen Polymermatrix. Mit Flüssigkeiten formen die Hydrokolloidpartikel ein Gel, welches mit der Vaseline eine amphiphile (hydrophil-lipophil) Schicht bildet. Dies unterstützt die Wundheilung. Ein Verkleben mit der Wunde wird weitgehend verhindert. Die Verbände sind einzeln steril verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert. Das Produkt ist für den Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt bleibt.

Produktzusammensetzung:

Vaseline, medizinisches Weißöl, Polyester (Polyethylenterephthalat), Natrium-Carboxymethylcellulose, Synthesekautschuk, Antioxidans Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat).

Zweckbestimmung:

Lomatuell® Pro eignet sich für die Behandlung von oberflächlichen, akuten und chronischen Wunden.

Indikationen:

Lomatuell® Pro ist für folgende Indikationen geeignet:

Chronische Wunden:

- Ulcus cruris,
- diabetische Fußulcera,
- Dekubitus.

Akute Wunden:

- Riss-, Schnitt- und Schürfwunden,
- Verbrennungen zweiten Grades.

Post-chirurgische Wunden:

- Sekundär heilende Operationswunden,
- Spalthautentnahmestellen.

Kontraindikationen:

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem Produkt oder seinen Bestandteilen.

Nebenwirkungen:

Bisher sind keine bekannt.

Anwendung:

1. Vorbereiten der Wunde:

Vor der Applikation sollte eine übliche Wundreinigung durchgeführt werden.

2. Anlegen des Wundverbandes:

Für eine bessere Handhabung können die Einmalhandschuhe mit steriler physiologischer Kochsalzlösung angefeuchtet werden. Die Abdeckfolie entfernen und danach Lomatuell® Pro etwa 1 cm überlappend auf die Wunde aufbringen.

Um die Dimensionen der Wundauflage an die Wunde anzupassen, kann bei Bedarf Lomatuell® Pro mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden.

Bei stark exsudierenden Wunden mit einer stark absorbierenden Wundauflage abdecken (z.B. Vliwasorb®, Vliwazel®), bei mäßig bis schwach exsudierenden Wunden reicht eine Mull- oder Vliesstoffkompressen (z.B. Gazin® oder Vliwasoft®). Anschließend fixieren, z.B. mit Suprasorb® F oder Curafix® H.

Lomatuell® Pro ist mit Unterdrucktherapie als Wunddistanzgitter kombinierbar.*

3. Verbandwechsel:

Das empfohlene Verbandwechselintervall beträgt in der Regel 2-4 Tage. Je nach Art und Heilungsfortschritt der Wunde kann der Verband länger (bis max. 7 Tage) oder kürzer auf der Wunde belassen werden – in Absprache mit dem medizinischen Verantwortlichen.

Besonderer Hinweise:

Im Fall einer Infektion oder sonstiger Entzündungszeichen (z. B. Überwärmung, Ödem, Rötung, Schmerz) bitte den medizinischen Verantwortlichen kontaktieren. Bei Behandlung von infizierten Wunden ist der Wundverband nicht als alleinige Therapiemaßnahme einzusetzen.

Lomatuell® Pro liegend und nicht über 25 °C lagern.

*Basierend auf in-vitro Untersuchungen.