



INSTRUCTIONS FOR USE



KLINION

WOUND CARE

UK

RP

H&R Healthcare Ltd.
3 Redcliff Road - Melton Park
Melton - Huli - HU14 3FS
United Kingdom

CH

REP

Mediq Suisse AG
Rosenquaistrasse 25
CH - 8808 Bubikon
Switzerland



www.medeco.org



Medeco B.V.
Brandpuntaan Zuid 1.4
2665 NZ Bleiswijk
The Netherlands



www.medeco.org
















IFU_KWC056_07
15-09-2023 / 0_040101

ENGLISH

Product Description

Kliniderm Foam dressings are sterile wound dressings. The wound contact layer consists of hydrophilic, absorbent polyurethane foam. The outer layer is pink, smooth, waterproof and made of polyurethane film. It has a high permeability to allow effective vapour transfer and provides a bacterial barrier. Kliniderm Foam dressings maintain a moist wound environment to assist in the healing process of moderate to heavily exuding wounds. Kliniderm Foam dressings are available in three variants: adhesive/border, non-adhesive and heel.

Not made with natural rubber latex of DEHP. Medical device.



Indications

Kliniderm Foam dressings are indicated for moderate to heavily exuding chronic and acute wounds and may be used throughout the healing process on the following wounds: pressure ulcers, venous leg ulcers, diabetic foot ulcers, lacerations, abrasions, post-operative surgical wounds, superficial and partial thickness burns. Kliniderm Foam dressings are suitable for use under compression bandaging and may be used on cavity wounds as a secondary dressing. Kliniderm Foam Heel variant is ideal for use on the heel and similar anatomical areas.

Contra-indications

None known.

Directions for use

- Application:
- Select a suitable size of Kliniderm Foam so that the dressing overlaps the wound margins by approximately 2 cm/0.8". Cut the dressing to size if necessary.
 - Apply to the wound directly.
 - In case of using the non-adhesive or heel variant of Kliniderm Foam, ensure the dressing is applied to the wound with the pink side up.
 - In case of using a non-adhesive or heel variant of Kliniderm Foam, secure the dressing in place with an appropriate retention bandage or tape. The tape should only be applied to the edge of the dressing.

Dressing change and removal:

- Kliniderm Foam dressings can remain in

- place for up to 7 days, dependent on the condition of the patient and the level of exudate.
- Replace Kliniderm Foam when the dressing has reached its absorbent capacity or whenever good wound practice dictates the dressing should be changed.
- Gently remove the dressing from the wound bed and dispose according to local procedures and guidelines. If removal appears to be difficult, saturate the dressing with sterile saline solution.
- If required, irrigate the wound site according to good wound care practice.

Precautions

- In case of signs of infection, consult a healthcare professional for adequate infection treatment.
- Do not use with oxidising solutions such as hypochlorite or hydrogen peroxide, as these can break down the absorbent component of the dressing.
- Do not use on patients with a known sensitivity to polyurethane films, foams or acrylic adhesives (border).
- Sterile if pouch and seal are intact. Do not use if damaged.
- Do not re-use. Re-use can cause serious infections.
- Do not re-sterilize.
- For external use only.
- For use under the guidance of a healthcare professional.

In case a serious incident has occurred in relation to the device: Inform Medeco BV as listed on the packaging, your local distributor and the competent authority.

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Kliniderm Foam Verbände sind sterile Wundauflagen. Die Wundkontaktschicht besteht aus einem hydrophilen, saugfähigen Polyurethanschaum. Die Außenschicht ist rosafarben, glatt, wasserdicht und aus Polyurethanfolie gefertigt. Sie weist eine hohe Permeabilität auf, um eine effektive Wasserdampfdurchlässigkeit zu ermöglichen, und bildet eine bakterielle Barriere. Kliniderm Foam Verbände halten eine feuchte Wundumgebung aufrecht, um den Heilungsprozess von mittelschweren bis stark exsudierenden Wunden zu unterstützen. Kliniderm Foam Verbände sind in drei Varianten erhältlich: haftend/Kleberand, nicht-haftend und für Fersen.

Nicht aus Naturkautschuklatex oder DEHP hergestellt. Medizinprodukt.



Indikationen

Kliniderm Foam Verbände sind für mittelschwere bis stark exsudierende chronische und akute Wunden indiziert und können während des gesamten Heilungsprozesses bei folgenden Wunden eingesetzt werden: Druckgeschwüre, venöse Beingeschwüre, diabetische Fußgeschwüre, Schnittwunden, Schürfwunden, postoperative chirurgische Wunden, oberflächliche und teildicke Verbrennungen. Kliniderm Foam Verbände sind für den Einsatz unter Kompressionsverbänden geeignet und können bei Kavitätätenwunden als Sekundärverband verwendet werden. Kliniderm Foam Fersenvariante ist ideal für den Einsatz an der Ferse und ähnlichen anatomischen Bereichen.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Gebrauchsanweisung

- Anwendung:
- Wählen Sie eine geeignete Größe des Kliniderm Foam Verbandes, so dass der Verband die Wundränder um ca. 2 cm überlappt. Schneiden Sie den Verband bei Bedarf auf Maß zu.
 - Direkt auf die Wunde auftragen.
 - Bei Verwendung de nicht-haftenden oder Fersenvariante von of Kliniderm Foam ist darauf zu achten, dass der Verband mit der rosafarbenen Seite nach oben auf die Wunde aufgebracht wird.
 - Bei Verwendung einer nicht-haftenden oder fersengebundenen Variante von Kliniderm Foam ist der Verband mit einem geeigneten Halteverband oder Klebeband zu sichern. Das Band sollte nur auf die Kante des Verbandes aufgebracht werden.

Verbandwechsel und -entfernung:

- Kliniderm Foam Verbände können bis zu 7 Tag an Ort und Stelle bleiben, abhängig vom Zustand des Patienten und dem Exsudat.
- Ersetzen Sie Kliniderm Foam, wenn der Verband die max. Aufnahmefähigkeit erreicht hat oder wann immer die gute Wundpraxis einen Verbandwechsel vorschreibt.
- Nehmen Sie den Verband vorsichtig vom Wundbett ab und entsorgen Sie ihn nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien. Wenn die Entfernung schwierig erscheint, sättigen Sie das Dressing mit steriler Kochsalzlösung.
- Die Wundstelle Bei Bedarf nach guter Wundversorgungspraxis spülen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Im Falle von Anzeichen einer Infektion wenden Sie sich an einen Arzt, um diese angemessen zu behandeln.
- Nicht mit oxidierenden Lösungen wie Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid verwenden, da diese die saugfähige Komponente des Verbandes abbauen können.
- Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Polyurethanfolien, Schaumstoffen oder Acryklebstoffen (Rand) verwenden.
- Steril, wenn Beutel und Siegel intakt sind. Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung kann zu schweren Infektionen führen.
- Nicht (wieder) sterilisieren.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Zur Verwendung unter der Anleitung von medizinischem Fachpersonal.

Falls ein schwerer Vorfall in Bezug auf das Produkt aufgetreten ist: Informieren Sie Medeco BV, wie auf der Verpackung angegeben, Ihren lokalen Vertriebspartner und Ihre lokale Gesundheitsbehörde.

NEDERLANDS

Productbeschrijving

Kliniderm Foam verbanden zijn steriele wondverbanden. De wondcontactlaag bestaat uit hydrofiel, absorberend polyurethaan schuim. De toplaag is roze, zacht, waterbestendig en gemaakt van een polyurethaan folie. Deze toplaag heeft een hoge dampdoorlaatbaarheid wat zorgt voor een effectieve vochtafvoer en die dient als bacteriële barrière. Kliniderm Foam verbanden zorgen voor een vochtig wondklimaat, wat bijdraagt in het helingsproces van matig tot sterk exsuderende wonden. Kliniderm Foam verbanden zijn verkrijgbaar in drie varianten: klevend/border, niet-klevend en een hiel variant.

De producten zijn vrij van natuurlijk rubber latex en DEHP. Medisch hulpmiddel.



Indicaties

Kliniderm Foam verbanden zijn bestemd voor matig tot sterk exsuderende chronische en acute wonden en mogen gedurende het genezingsproces gebruikt worden op de volgende wonden: drukplekzweren, veneuze beenzweren, diabetische voetzweren, snijwonden, schaafwonden, postoperatieve chirurgische wonden, eerste- en tweedegraads brandwonden. Kliniderm Foam verbanden kunnen onder compressie gebruikt worden. De Kliniderm Foam hiel variant is ideaal voor gebruik op de hiel en anatomische vergelijkbare plekken.

Contra-indicaties

Geen bekend.

Gebruiksaanwijzing

- Toepassing:
- Selecteer een geschikte maat Kliniderm Foam en zorg dat het verband de wondranden met ongeveer 2 cm/0,8" overlapt. Het verband kan indien nodig op maat geknipt worden.
 - Direct op de wond aanbrengen.
 - Indien de niet-klevende of hiel variant gebruikt wordt, breng het verband met de roze kant naar boven aan.
 - Indien de niet-klevende of hiel variant gebruikt wordt, fixeër het verband met een zwachtel of tape. De tape alleen aanbrengen aan de randen van het verband.

Verbandwissel en verwijdering:

- Kliniderm Foam kan tot 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de conditie van de patiënt en de hoeveelheid exsudaat.
- Vervang Kliniderm Foam wanneer het verband de maximale absorptiecapaciteit bereikt heeft of wanneer goede wondverzorging voorschrijft dat het verband verwisseld moet worden.
- Verwijder het verband voorzichtig van het wondbed en werp het weg volgens lokale procedures en richtlijnen. Wanneer verwijdering moeilijk blijkt, verzadig het verband dan met een steriele zoutoplossing.
- Indien nodig, iriggeer de wond zoals goede wondverzorging voorschrijft.

Voorzorgsmaatregelen

- In het geval van tekenen van infectie, raadpleeg dan direct een professionele zorgverlener voor een adequate infectiebehandeling.
- Niet gebruiken in combinatie met oxiderende oplossingen zoals hypochloriet of waterstofperoxide; deze stoffen kunnen het absorberende bestanddeel van het verband afbreken.
- Niet gebruiken bij patiënten waarvan gevoeligheid voor polyurethaan folie, schuim of acrykleefstoffen (klevend/border) bekend is.
- Steriel indien verpakking en verzegeling intact zijn. Niet gebruiken indien beschadigd.
- Niet hergebruiken. Hergebruik kan ernstige infecties veroorzaken.
- Niet hersteriliseren.
- Alleen voor uitwendig gebruik.

- Voor gebruik onder begeleiding van een professionele zorgverlener.

In het geval er een ernstig incident plaatsvindt in relatie tot het hulpmiddel: Informeer Medeco BV zoals geregistreerd op de verpakking, de lokale distributeur en de competente autoriteit.

FRANÇAIS

Description du Produit

Les pansements Kliniderm Foam sont des pansements stériles. La couche en contact avec la plaie est constituée de mousse en polyuréthane absorbante hydrophile. La couche externe est rose, lisse, imperméable et constituée d'un film de polyuréthane. Le pansement possède une haute perméabilité pour permettre un transfert de vapeur efficace et fournit une barrière bactérienne. Les pansements Kliniderm Foam maintiennent un environnement humide pour faciliter le processus de guérison des plaies à exsudation modérée à forte. Les pansements Kliniderm Foam sont disponibles en trois variantes: adhésif/bordure, non-adhésif et pour talon.

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ou de DEHP. Dispositif médical



Indications

Les pansements Kliniderm Foam sont indiqués pour les plaies chroniques et aiguës à exsudation modérée à forte et peuvent être utilisés tout au long du processus de guérison des plaies suivantes: ulcères de pression, ulcères veineux de la jambe, ulcères du pied diabétique, lésions, excoriations, lésions chirurgicales postopératoires, brûlures au deuxième degré. Les pansements Kliniderm Foam conviennent à une utilisation sous un bandage compressif et peuvent être utilisés sur des plaies profondes en tant que pansement secondaire. La variante Kliniderm Foam Heel est idéale pour une utilisation sur le talon et les zones anatomiques similaires.

Contre-indications

Aucune connue.

Instructions d'utilisation

- Application:
- Sélectionnez une taille appropriée de pansement Kliniderm Foam afin que le pansement recouvre les bords de la plaie d'environ 2 cm. Couper le pansement à la taille désirée.
 - Appliquez directement sur la plaie.
 - En cas d'utilisation de la variante non adhésive ou pour talon, assurez-vous que le pansement soit appliqué sur la plaie avec le côté rose en haut.
 - En cas d'utilisation d'une variante non adhésive ou pour talon, fixez le pansement en place avec un bandage ou un ruban de rétention approprié. Le ruban ne doit être appliqué que sur le bord du pansement.

Changement de pansement et retirer le pansement:

- Les pansements Kliniderm Foam peuvent rester en place jusqu'à 7 jours, en fonction de l'état du patient et du niveau d'exsudat.
- Remplacez le pansement Kliniderm Foam lorsque le pansement a atteint sa capacité d'absorption ou lorsque nécessaire selon les bonnes pratiques de traitement des blessures.
- Retirez délicatement le pansement du lit de la plaie et éliminez-le conformément aux procédures et directives locales. Si le retrait semble difficile, saturer le pansement avec une solution saline stérile.
- Si nécessaire, irriguez le site de la plaie conformément aux bonnes pratiques de traitement des blessures.

Précautions

- En cas de signes d'infection, consultez un professionnel de la santé pour un traitement adéquat de l'infection.
- Ne pas utiliser avec des solutions oxydantes telles que l'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène, car elles peuvent dégrader le composant absorbant du pansement.
- Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité connue aux films de polyuréthane, aux mousses ou aux adhésifs acryliques (bordure).
- Sterile si le sachet et l'emballage sont intacts.
- Ne pas utiliser si endommagé.
- Ne pas réutiliser. La réutilisation peut causer des infections graves.
- Ne pas (re)stériliser.
- Pour usage externe seulement.
- Pour une utilisation sous la direction d'un professionnel de la santé.

En cas d'incident grave lié à l'utilisation du pansement : Informez-en Medeco BV, tel qu'indiqué sur l'emballage, votre distributeur local et votre autorité sanitaire locale.

ESPAÑOL

Descripción del producto

Los apósitos Kliniderm Foam son apósitos estériles para heridas. La capa en contacto con la herida consiste en espuma de poliuretano hidrófila y absorbente. La capa exterior es rosa, lisa, impermeable y está hecha de película de poliuretano. Tiene una alta permeabilidad para permitir una transferencia de vapor efectiva y proporciona una barrera antibacteriana. Los apósitos Kliniderm Foam mantienen el ambiente de la herida húmedo para ayudar en el proceso de curación de heridas con exudado moderado a intenso. Los apósitos Kliniderm Foam están disponibles en tres variantes: adhesivo/borde, no adhesivo y talón.

No hecho con látex de caucho natural o DEHP. Producto sanitario.



Indicaciones

Los apósitos Kliniderm Foam son indicados para heridas crónicas y agudas de moderada a muy exudativa y pueden ser utilizados durante todo el proceso de cicatrización en las siguientes heridas: úlceras por presión, úlceras venosas, úlceras del pie diabético, laceraciones, excoriaciones, heridas quirúrgicas postoperatorias, quemaduras de espesura superficial y parcial. Los apósitos de espuma Kliniderm son adecuados para usar en vendajes de compresión y se pueden usar en las heridas cavitarias como apósito secundario. La variante Kliniderm Foam Heel es ideal para usar en el talón y áreas anatómicas similares.

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Indicaciones de uso

- Aplicación:
- Seleccione un tamaño adecuado de Kliniderm Foam para que el apósito se superponga con los bordes de la herida en aproximadamente 2 cm/0,8". Cortar el vendaje a medida si es necesario.
 - Aplicar directamente sobre la herida.
 - Si usa la variante Kliniderm Foam no adhesiva o del talón, asegúrese de aplicar el apósito a la herida con el lado rosado hacia arriba.
 - Si usa una variante de Kliniderm Foam no adhesiva o para talón, asegure el vendaje en su lugar con una cinta o venda de contención adecuada. La cinta solo debe aplicarse al borde del apósito.

Cambio de vestuario y retirada:

- Los apósitos Kliniderm Foam pueden permanecer en su lugar hasta por 7 días, dependiendo de la condición del paciente y el nivel de exudado.
- Reemplace el Kliniderm Foam cuando el apósito haya alcanzado su capacidad absorbente o cuando una buena práctica de tratamiento de heridas indique que se debe cambiar el apósito.
- Retire cuidadosamente el vendaje del lecho de la herida y deseché de acuerdo con los procedimientos y directrices locales. Si la remoción parece difícil, sature el vendaje con solución salina estéril.
- Si es necesario, moje el lugar de la herida de acuerdo con la buena práctica de tratamiento de las heridas.

Precauciones

- En caso de signos de infección, consulte a un profesional de la salud para el tratamiento adecuado de la infección.
- No utilice con soluciones oxidantes, como hipoclorito o peróxido de hidrógeno, ya que pueden romper el componente absorbente del apósito.
- No utilice en pacientes con sensibilidad conocida a películas de poliuretano, espumas o adhesivos acrílicos.
- Estéril si la bolsa y el sello están intactos. No utilice si está dañado.
- No vuelva a utilizar. La reutilización puede causar infecciones graves.
- No (re)esterilice.
- Sólo para uso externo.
- Para uso bajo la guía de un profesional de la salud.


En caso de que haya ocurrido un incidente grave en relación con el dispositivo: Informe a Medeco BV como se indica en el empaque, a su distribuidor local y a su autoridad local de atención médica.

PORTUGUÊS

Descrição do Produto

Os curativos Kliniderm Foam são curativos estéreis para feridas. A camada em contato com a ferida consiste em espuma de poliuretano hidrofílica e absorvente. A camada externa é rosa, lisa, impermeável e é feita de filme de poliuretano. Possui alta permeabilidade para permitir uma transferência efetiva de vapor e fornece uma barreira antibacteriana. Os curativos Kliniderm Foam mantêm o ambiente da ferida húmido para auxiliar no processo de cicatrização com exsudato moderado a intenso. Os curativos Kliniderm Foam estão disponíveis em três variantes: adesivo/borda, não adesivo e calcanhar.

Não feito com látex de borracha natural ou DEHP. Dispositivo médico.

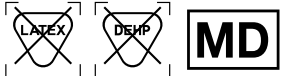

Indicações

Os curativos Kliniderm Foam são indicados para feridas crônicas e agudas de moderada a muito exsudativa e podem ser utilizados durante todo o processo de cicatrização nas seguintes feridas: úlceras por pressão, úlceras venosas, úlceras diabéticas nos pés, lacerações, excoriações, feridas cirúrgicas pós-operatórias, queimaduras de espessura superficial e parcial. Os curativos de espuma Kliniderm são adequados para uso em bandagens de compressão e podem ser usados em feridas cavitárias como curativo secundário. A variante Kliniderm Foam Heel é ideal para uso no calcanhar e em áreas anatómicas similares.

Contra-indicações

Nenhuma conhecida.

Indicações para o uso

- Aplicação:
- Selecione um tamanho apropriado de Kliniderm Foam para que o curativo se sobreponha às bordas da ferida em aproximadamente 2 cm/0,8". Corte o curativo no tamanho, se necessário.
 - Aplique diretamente na ferida.
 - Se usar a variante Kliniderm Foam não adesiva ou de calcanhar, certifique-se de aplicar o curativo na ferida com o lado rosa voltado para cima.
 - Se usar uma variante Kliniderm Foam não adesiva ou de calcanhar, prenda o curativo no lugar com uma fita ou curativo de contenção adequado. A fita deve ser aplicada apenas na borda do curativo.

Troca e remoção do curativo:

- Os curativos "Kliniderm Foam" podem permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudato.
- Substitua o Kliniderm Foam quando o curativo atingir sua capacidade absorvente ou quando boas práticas de controle de feridas indicarem que o curativo deve ser trocado.
- Remova cuidadosamente o curativo do leito da ferida e descarte-o de acordo com os procedimentos e diretrizes locais. Se a remoção parecer difícil, sature o curativo com solução salina estéril.
- Se necessário, molhe o local da ferida de acordo com as boas práticas de tratamento da ferida.

Precauções

- Em caso de sinais de infecção, consulte um profissional de saúde para o tratamento adequado da infecção.
- Não use com soluções oxidantes, como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois elas podem afetar o componente absorvente do curativo.
- Não use em pacientes com sensibilidade conhecida a filmes de poliuretano, espumas ou adesivos acrílicos (borda).
- Estéril se a embalagem e o selo estiverem intactos. Não use se estiver danificado.
- Não reutilize. A reutilização pode causar infecções graves.
- Não (re)esterilize.
- Somente para uso externo.
- Para uso sob orientação de um profissional de saúde.

No caso de um incidente grave ter ocorrido em relação ao dispositivo: Informe a Medeco BV conforme listado na embalagem, o seu distribuidor local e a sua autoridade local de saúde.

ITALIANO

Descrizione prodotto

Le medicazioni Kliniderm Foam sono medicazioni sterili per ferite. Lo strato a contatto con la ferita è costituito da schiuma di poliuretano idrofila e assorbente. Lo strato esterno è rosa, liscio, impermeabile e realizzato in pellicola di poliuretano. Ha un'alta permeabilità per consentire un efficace trasferimento di vapore e fornisce una barriera antibatterica. Le medicazioni Kliniderm Foam mantengono umido l'ambiente della ferita per aiutare nel processo di guarigione delle ferite da moderatamente a fortemente essudanti. Le medicazioni Kliniderm Foam sono disponibili in tre varianti: adesiva/bordo, non adesiva e tallone.

Non realizzato con lattice di gomma naturale o DEHP. Dispositivo medico.



Indicazioni

Le medicazioni Kliniderm Foam sono indicate per ferite croniche e acute da moderatamente a fortemente essudanti e possono essere utilizzate durante il processo di guarigione nelle seguenti ferite: ulcere da pressione, ulcere venose, ulcere del piede diabetico, lacerazioni, abrasioni, lesioni della pelle, aree donatrici, ferite chirurgiche postoperatorie, ustioni superficiali e parziali. Le medicazioni Kliniderm Foam sono adatte all'uso in bendaggi compressivi e possono essere utilizzate su ferite cavitarie come medicazione secondaria. La variante Kliniderm Foam Heel è ideale per l'uso sul tallone e aree anatomiche simili.

Controindicazioni

Nessuna conosciuta

Istruzioni per l'uso

- Applicazione:
- Selezionare una misura adatta di Kliniderm Foam in modo che la medicazione si sovrapponga ai margini della ferita di circa 2 cm/0,8". Tagliare la medicazione su misura, se necessario.
 - Applicare direttamente sulla ferita.
 - In caso di utilizzo della variante di Kliniderm Foam non adesiva o per tallone, assicurarsi che la medicazione sia applicata sulla ferita con il lato rosa rivolto verso l'alto.
 - In caso di utilizzo di una variante non adesiva o per tallone di Kliniderm Foam, fissare la medicazione in posizione con un nastro o un cerotto di contenimento appropriati. Il nastro deve essere applicato solo sul bordo della medicazione.

Cambio e rimozione della medicazione:

- Le medicazioni Kliniderm Foam possono rimanere in sede per un massimo di 7 giorni, a seconda delle condizioni del paziente e del livello di essudato.
- Sostituire la Kliniderm Foam quando la medicazione ha raggiunto la sua capacità assorbente o ogni volta che una buona pratica di trattamento della ferita impone che la medicazione debba essere cambiata.
- Rimuovere con cautela la medicazione dal letto della ferita e scartarla secondo le procedure e le linee guida locali. Se la rimozione sembra difficile, saturare la medicazione con soluzione salina sterile.
- Se necessario, irrigare il sito della ferita secondo una buona prassi di cura delle ferite.

Precauzioni

- In caso di segni di infezione, consultare un operatore sanitario per un adeguato trattamento delle infezioni.
- Non utilizzare con soluzioni ossidanti, come l'ipoclorito o il perossido di idrogeno, poiché potrebbero inibire il componente assorbente della medicazione.
- Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota a pellicole in poliuretano, schiume o adesivi acrilici (bordo).
- Sterile se la confezione e il sigillo sono intatti. Non usare se danneggiato.
- Sterile se la confezione e il sigillo sono intatti. Non usare se danneggiato.
- Non (ri)sterilizzare.
- Solo per uso esterno.
- Da utilizzare sotto la guida di un professionista della salute.

Nel caso si verifici un incidente grave in relazione al dispositivo: Informare Medeco BV come elencato sulla confezione, il distributore locale e l'autorità sanitaria locale.

DANSK

Produktbeskrivelse

Kliniderm Foam bandager er sterile sårforbindinger. Sårkontaktlaget består af hydrofil, absorberende polyuretanskum. Det yderste lag er lyserødt, glat, vandtæt og fremstillet af polyuretan film. Det har en høj permeabilitet for at muliggøre effektiv dampoverførsel og tilvejebringer en bakteriel barriere. Kliniderm Foam bandager opretholder et fugtigt særmiljø for at hjælpe med helingsprocessen af moderat til kraftigt væskende sår. Kliniderm Foam bandager fås i tre varianter: Selvklebende / kant, ikke klebende og heel.

Ikke fremstillet med naturgummilætex eller DEHP. Medicinsk udstyr.



Indikationer

Kliniderm Foam bandager er indiceret til moderat til kraftigt væskende kroniske og akutte sår og kan bruges under hele helingsprocessen på følgende sår: tryksår, venøse bensår, diabetiske fodsår, rifter, hudafskrabninger, postoperative kirurgiske sår, overfladisk og delvis forbrændinger. Kliniderm Foam bandager er egnede til anvendelse under kompressionsforbinding og kan anvendes på kavitetssår som en sekundær forbinding. Kliniderm Foam Heel variant er ideel til brug på hælen og lignende anatomiske områder.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Brugsanvisning

Anvendelse:

- Vælg

