



Antimicrobial, odour adsorbing primary wound dressing.

Antimicrobial and odour adsorbing primary dressing. For single use only. Store in a dry place (<25°C / <77°F). Avoid exposure to temperatures above 50°C/122°F.

Description

Zorflex LA dressing consists of a pure activated carbon cloth with a low adherent layer applied to both sides. It is a comfortable dressing that maintains contact with the wound surface. The Zorflex LA dressing is black to grey in colour, variation in colour is possible, however this does not affect the performance. Zorflex LA provides an effective anti-microbial barrier to microbial contamination protecting the wound from invasive micro-organisms which may prevent the wound from healing. Zorflex LA is also effective against micro-organisms already present in the wound. The anti-microbial barrier properties of the Zorflex®-la remain effective for a minimum of 7 days. Zorflex® has been shown to reduce odour, pain and exudation. Zorflex® is conductive. Zorflex LA can be used either dry or moistened with sterilised water.

Indications

Zorflex LA is indicated as an antimicrobial low adherent dressing over discharging, partial and full thickness wounds such as: cavities and fistulas, trauma, surgical sites, fungating carcinomas, pressure ulcers, venous ulcers, diabetic ulcers, burns, donor and recipient graft sites.

Contra-indications

None.


Precautions

Use sterile water to cleanse, irrigate or moisten the wound. The use of oil based products, topical ointments or saline will reduce the effectiveness of Zorflex LA. Do not reuse. If reused the performance of the product may deteriorate and cross contamination may occur.

Instructions for use

- Cleanse the wound with sterile water.
- Cut the dressing to shape, covering the periwound if maceration is evident. Do not tear.
- Apply Zorflex LA either way up to the wound surface.
- Secure the Zorflex LA dressing in place using an appropriate secondary dressing or compression therapy. Alternatively secure with a dressing retention sheet, tape or bandage. In the case of highly exudating wound an absorbent secondary dressing is appropriate. Zorflex LA allows transfer of the exudate into the secondary dressing which should be replaced as necessary without disturbing the Zorflex LA or the wound bed.
- Should the dressing dry or adhere to the wound, moisten or soak the dressing with sterile water to assist removal and avoid disruption of the healing wound.
- Zorflex LA can be left on the wound for up to 7 days, or as clinically indicated. Any threads or fibres which detach from the dressing can be easily seen and removed.
- Device should only be used as specified.
- Device should be used under relevant supervision by healthcare professionals.

Instructions for use			
Product Availability			
Code	Size	Availability	
ZLA10	10.5cm x 10.5cm (4 1/4" x 4 1/4")	Pouched only	
ZLA15	15cm x 25cm (6" x 10")	Pouched only	
ZLA20	20cm x 10cm (8" x 4")	Pouched only	
Manufacturer			
Chemvion Carbon Limited, Cloth Division, Rainton Bridge Industrial Estate Houghton-le-Spring, Tyne & Wear, DH4 5PP, GB			
Zorflex® trade mark of Chemvion Carbon.			

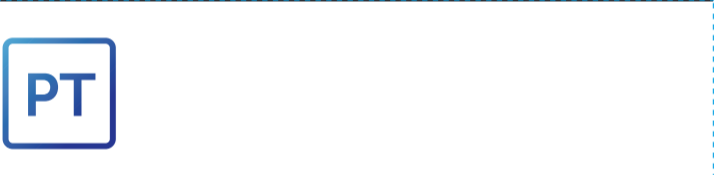

Penso primário antimicrobiano para feridas, adsorvente de odores.

Penso primário antimicrobiano e adsorvente de odores. Apenas para utilização única. Guardar em local seco (<25 °C / <77 °F). Evitar exposição a temperaturas acima dos 50 °C/122 °F.

Descrição

O penso Zorflex LA consiste num tecido de carvão ativado puro com uma camada de baixa aderência aplicada de ambos os lados. É um produto confortável que mantém o contacto com a superfície da ferida. O penso Zorflex LA tem uma cor escura e possível que a cor varie, contudo tal não afeta o desempenho. O Zorflex LA proporciona uma barreira antimicrobiana eficaz contra a contaminação microbiana, protegendo a ferida de micro-organismos invasivos que podem impedir a cicatrização da ferida. O Zorflex LA também é eficaz contra micro-organismos já existentes na ferida. As propriedades de barreira antimicrobiana da camada de Zorflex® permanecem eficazes durante um mínimo de 7 dias. O Zorflex® demonstrou reduzir o odor, a dor e a exsudação. O Zorflex® é condutivo. O Zorflex LA pode ser utilizado seco ou humedecido com água esterilizada.

Indicações

O Zorflex LA está indicado como penso antimicrobiano de baixa aderência para aplicação sobre feridas supurativas com uma espessura parcial ou total, como por exemplo: cavidades e fistulas, trauma, locais cirúrgicos, carcinomas fungiformes, úlceras de decúbito, úlceras venosas, úlceras diabéticas, queimaduras, zonas de enertos tanto em doadores como em recetores.

Contraindicações

Nenhuma.

Precauções

Utilize água esteril para limpar, irrigar ou humedecer a ferida. A utilização de produtos à base de óleos, pomadas tópicos ou soro fisiológico diminuirá a eficácia de Zorflex LA. Não reutilizar. Em caso de reutilização o desempenho do produto pode deteriorar-se e pode ocorrer contaminação cruzada.

Instruções de utilização

- Limpe a ferida com água esteril.
- Crite o penso a medida, cubra a zona circundante se existirem evidências de maceração. Não reutilize.
- Aplique Zorflex LA com qualquer dos lados para cima sobre a superfície da ferida.
- Fixe o penso Zorflex LA utilizando um penso secundário ou terapia de compressão. Também pode fixá-lo com uma fita de retenção de penso, adesivo ou ligadura. No caso de feridas muito supuradas, recomenda-se um penso secundário absorvente. O Zorflex LA permite a transferência da supuração para o segundo penso que deverá ser substituído sempre que necessário, uma vez que ateta o Zorflex LA ou o leito da ferida.
- Se o penso secar ou aderir à ferida, humedeca o empape o penso com água esteril para ajudar a remoção e evite a ruptura da cicatrização da ferida.
- O Zorflex LA pode permanecer sobre a ferida até 7 dias, ou de acordo com a indicação clínica. Qualquer fo ou fibra que se solte do penso podem ser facilmente removidos.
- O dispositivo deve ser utilizado apenas conforme especificado.
- O dispositivo apenas deve ser utilizado sob a supervisão relevante de profissionais de saúde.

Disponibilidade do produto			
Código	Tamanho	Disponibilidade	
ZLA10	10.5 cm x 10.5 cm (4 1/4" x 4 1/4")	Apenas em saco	
ZLA15	15 cm x 25 cm (6" x 10")	Apenas em saco	
ZLA20	20 cm x 10 cm (8" x 4")	Apenas em saco	
Fabricante			
Chemvion Carbon Limited, Cloth Division, Rainton Bridge Industrial Estate Houghton-le-Spring, Tyne & Wear, DH4 5PP, GB			
Zorflex® trade mark of Chemvion Carbon.			

Produkttilgængelighed			
Kode	Størrelse	Tilgængelighed	
ZLA10	10,5 cm x 10,5 cm (4 1/4" x 4 1/4")	Enkeltvis emballert	
ZLA15	15 cm x 25 cm (6" x 10")	Enkeltvis emballert	
ZLA20	20 cm x 10 cm (8" x 4")	Enkeltvis emballert	
Producent			
Chemvion Carbon Limited, Cloth Division, Rainton Bridge Industrial Estate Houghton-le-Spring, Tyne & Wear, DH4 5PP, GB			
Zorflex® er et varemærke tilhørende Chemvion Carbon.			



Pansemnt primaire antimicrobienne, absorbant d'odeur.

Pansemnt primaire antimicrobien et absorbant d'odeur. Pour usage unique seulement. A conserver dans un endroit sec (à température < 25 °C). Éviter l'exposition à des températures supérieures à 50 °C.

Description

Le pansement Zorflex LA est composé d'un tissu de pur charbon actif recouvert de chaque côté d'une couche à faible adhérence. Le pansement est confortable et reste en contact avec la surface de la plaie. Le pansement Zorflex LA est gris à noir ; une variation de couleur est possible, mais cela n'a aucune incidence sur les performances. Zorflex LA fournit une barrière antimicrobienne efficace contre la contamination microbienne, protégeant la plaie contre les micro-organismes invasifs qui peuvent empêcher la cicatrization de la plaie. Zorflex LA est également efficace contre les micro-organismes déjà présents dans la plaie. Les propriétés de la barrière antimicrobienne de la couche Zorflex® restent efficaces pendant au moins 7 jours. Il a été montré que Zorflex® réduit les odeurs, la douleur et l'exsudation. Zorflex® est conducteur. Zorflex LA peut être utilisé sec ou imbibé d'eau stérilisée.

Indications

Zorflex LA est indiqué comme pansement antimicrobien faiblement adhérent sur les plaies purulentes d'épaisseur partielle et complète telles que : cavités et fistules, traumatisme, sites chirurgicaux, excroissance fongueuse (carcinome), escames, ulcères veineux, ulcères diabétiques, brûlures, sites de greffe du donneur et du receveur.

Contre-indications

Aucune.

Précautions

Utilisez de l'eau stérile pour nettoyer, irriguer ou humidifier la plaie. L'utilisation de produits à base d'huile, d'onguents topiques ou de solution saline réduira l'efficacité de Zorflex LA. Ne pas réutiliser. En cas de réutilisation, les performances du produit pourraient se détériorer et des contaminations croisées pourraient se produire.

Mode d'emploi

- Nettoyez la plaie avec de l'eau stérile.
- Découpez le pansement à la forme désirée pour couvrir le périmètre si la macération est évidente. Ne pas déchirer.
- Appliquez Zorflex LA indifféremment d'un côté ou de l'autre à la surface de la plaie.
- Fixez localement le pansement Zorflex LA au moyen d'un pansement secondaire approprié ou par fixation de compression. En alternative, fixez le pansement avec un couvre-pansement adhésif, un sparadrap ou un bandage. En cas de plaies fortement exsudatives, un pansement secondaire absorbant est recommandé. Zorflex LA permet le transfert de l'exsudat dans le pansement secondaire qui devra être remplacé au besoin sans toucher le Zorflex LA ou le lit de la plaie.
- Si le pansement se dessèche ou adhère à la plaie, humidifiez-le ou mouillez-le avec de l'eau stérile afin de faciliter son retrait et évitez toute perturbation de la plaie en cours de guérison.
- Zorflex LA peut rester en place sur la plaie jusqu'à 7 jours, ou comme cliniquement indiqué. Les fils ou fibres qui se détachent du pansement sont facilement visibles et peuvent être retirés.
- Le dispositif doit être utilisé tel qu'indiqué
- Le dispositif doit être utilisé sous surveillance adéquate de professionnels de la santé.

Présentation du produit			
Code	Taille	Disponibilité	
ZLA10	10,5 cm x 10,5 cm	Sous pochette seulement	
ZLA15	15 cm x 25 cm	Sous pochette seulement	
ZLA20	20 cm x 10 cm	Sous pochette seulement	
Fabricant			
Chemvion Carbon Limited, Cloth Division, Rainton Bridge Industrial Estate Houghton-le-Spring, Tyne & Wear, DH4 5PP, RU			
Zorflex® marque déposée de Chemvion Carbon.			



Antimikrobielle, geruchsabsorbierende primäre Wundauflage

Antimikrobielle und geruchsabsorbierende primäre Wundauflage. Nur zum einmaligen Gebrauch. Trocken aufbewahren (< 25 °C / < 77 °F). Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

Beschreibung

Die Wundauflage Zorflex LA besteht aus reinen aktivierten Kohlenfasern, auf dem beidseitig eine gering anhaftende Schicht aufgetragen ist. Sie ist komfortabel und gewässertest stets den Kontakt mit der Wundoberfläche. Zorflex LA ist von grauer bis schwarzer Farbe, wobei mögliche Farbuntöne die Wirksamkeit nicht beeinträchtigen. Sie bildet eine wirksame antimikrobielle Barriere gegen mikrobielle Kontamination und schützt die Wunde vor eindringenden Mikroorganismen, die die Wundheilung beeinträchtigen können. Ebenso wirksam ist Zorflex LA gegen bereits in der Wunde vorhandene Mikroorganismen. Die Wirksamkeit der Zorflex®-Schicht als antimikrobielle Barriere bleibt mindestens 7 Tage erhalten. Zorflex® reduziert nachweislich Geruch, Schmerzen und Exsudation. Zorflex® ist leitfähig. Zorflex LA lässt sich trocken verwenden oder nach dem Aufweichen mit sterilisiertem Wasser.

Anzeigen

Zorflex LA ist angezeigt für eine antimikrobielle und anschniegsame Wundauflage auf nässenden oberflächlichen und tiefen Wunden, beispielsweise Hohlraum- und Fisteln, Traumata, Operationswunden, exulzierierenden Karzinomen, Druckgeschwüren, Venengeschwüren, Diabetesegeschwüren, Verbrennungen sowie Spender- und Empfänger-Transplantationsstellen.

Gegenanzeigen

Keine.

Vorsichtsmaßnahmen

Zum Reinigen, Spülen und Befuchten der Wunde sterilisiertes Wasser verwenden. Die Verwendung von Produkten auf Ölbasis, topischen Salben oder Salzwasser mindert die Wirksamkeit von Zorflex LA. Nur zum einmaligen Gebrauch. Bei erneuter Verwendung kann die Wirksamkeit des Produktes vermindert sein und es können Kreuzkontaminationen auftreten.

Verwendungshinweise

- Wunde mit steriltem Wasser reinigen.
- Wundauflage formgerecht zuschneiden, bei offensichtlicher Mazeration die Wundumgebung mit abdecken. Nicht reiben.
- Zorflex LA mit einer beliebigen Seite auf die Wundoberfläche legen.
- Die Wundauflage mittels eines geeigneten sekundären Verbandmaterials oder einer Kompressionsbehandlung fixieren. Alternativ eine Auflagenfixierung, eine Bandage oder einen Tapeverband verwenden. Im Falle stark exsudierender Wunden ist eine absorbierende sekundäre Wundauflage angebracht. Zorflex LA ermöglicht die Weitergabe des Exsudats in die sekundäre Wundauflage, die nach Bedarf ausgewechselt werden sollte, ohne die Zorflex LA oder den Wundgrund zu beeinträchtigen.
- Trocknet die Wundauflage ein oder haftet sie an der Wunde an, die Auflage mit sterilisiertem Wasser anfeuchten oder durchrassuen, um sie leichter entfernen zu können und ein Aufreißen der heilenden Wunde zu vermeiden.
- Zorflex LA kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben, oder gemäß klinischer Indikation. Alle sich von der Wundauflage lösenden Fasern und Fasern sollte sich erkennen und zu entfernen.
- Das Produkt ausschließlich gemäß den Hinweisen verwenden.
- Das Produkt sollte unter entsprechender Aufsicht durch Gesundheitspersonal werden.

Produktverfügbarkeit			
Artikelnummer	Größe	Produktverfügbarkeit	
ZLA10	10,5 cm x 10,5 cm (4 1/4" x 4 1/4")	Nur im Beutel.	
ZLA15	15 cm x 25 cm (6" x 10")	Nur im Beutel.	
ZLA20	20 cm x 10 cm (8" x 4")	Nur im Beutel.	
Hersteller			
Chemvion Carbon Limited, Cloth Division, Rainton Bridge Industrial Estate Houghton-le-Spring, Tyne & Wear, DH4 5PP, GB			
Zorflex® Handelsmarke von Chemvion Carbon.			



Medicazione primaria antimicrobica, antiodore.

Medicazione primaria antimicrobica e antiodore. Dispositivo monouso. Conservare in luogo asciutto (<25°C/77°F). Evitare l'esposizione a temperature superiori a 50°C/122°F.

Descrizione

La medicazione Zorflex LA consiste di un tessuto di carbone attivo puro con uno strato a bassa aderenza applicato su entrambi i lati. È una medicazione confortevole che si mantiene a contatto con la superficie della ferita. La medicazione Zorflex LA è di colore dal nero al grigio. La variazione del colore è possibile e non ne pregiudica le prestazioni. Zorflex LA fornisce un'efficace barriera antimicrobica, proteggendo la ferita da contaminazioni invasive che potrebbero ostacolare la guarigione. Zorflex LA è inoltre efficace contro i microorganismi già presenti nella ferita. Le proprietà della barriera antimicrobica dello strato di Zorflex® sono efficaci per almeno 7 giorni. Zorflex® ha dimostrato di ridurre l'odore, il dolore e l'esudazione. Zorflex® è conduttiva. Zorflex LA può essere utilizzata asciutta o inumidita con acqua sterilizzata.

Indicazioni

Zorflex LA è indicata come medicazione antimicrobica a bassa aderenza su ferite con secrezioni a spessore parziale e a tutto spessore, come: cavità e fistole, ferite da trauma, siti chirurgici, carcinomi vegetanti, piaghe da decubito, ulcere venose, ulcere diabetiche, ustioni, siti di innesto ricevente e donatore.

Controindicazioni

Nessuna.

Precauzioni

Pulire, bagnare o inumidire la ferita con acqua sterile. Uso di prodotti a base oleosa, unguenti topici o soluzioni saline riducono l'efficacia di Zorflex LA. Non riutilizzare. In caso di riutilizzo, le prestazioni del prodotto potrebbero diminuire e potrebbe verificarsi una contaminazione incrociata.

Istruzioni per l'uso

- Pulire la ferita con acqua sterile.
- Limpiare la medicazione secondo la forma desiderata. In caso di macerazione evidente, avere cura di coprire la cute perfezionale. Non strappare.
- Applicare Zorflex LA da qualsiasi lato coprendo l'intera superficie della ferita.
- Fixare la medicazione Zorflex LA in posizione utilizzando un'adeguata medicazione secondaria o terapia compressiva. In alternativa, fissare con un foglio di ritenzione per medicazioni, del nastro o con una benda. In caso di ferite ad elevata esudazione è opportuno applicare una medicazione assorbente secondaria. Zorflex LA consente il trasferimento dell'esudato nella medicazione secondaria, che deve essere sostituita secondo necessità senza interruzione con Zorflex LA o con il letto della ferita.
- Se la medicazione si asciuga o aderisce alla ferita, inumidirla o bagnarla con acqua sterile per facilitare la rimozione. In questo modo si evita di rompere la ferita interrompendo il processo di guarigione.
- Zorflex LA può essere lasciata sulla ferita fino a 7 giorni, o come clinicamente indicato. Eventuali fili o fibre che si staccano dalla medicazione saranno facilmente visibili e potranno essere rimossi.
- Utilizzare il dispositivo attentissimo rigorosamente alle indicazioni
- È sotto l'adeguata supervisione di un operatore sanitario.

Disponibilità del prodotto

Codice	Dimensioni	Disponibilità	
ZLA10	10.5cm x 10.5cm (4 1/4" x 4 1/4")	Solo in buste	
ZLA15	15cm x 25cm (6" x 10")	Solo in buste	
ZLA20	20 cm x 10cm (8" x 4")	Solo in buste	
Fabricante			
Chemvion Carbon Limited, Cloth Division, Rainton Bridge Industrial Estate Houghton-le-Spring, Tyne & Wear, DH4 5PP, GB			
Zorflex® è un marchio di Chemvion Carbon.			



Apósito primario antimicrobiano, adsorbedor de olores

Apósito primario antimicrobiano y adsorbedor de olores. Únicamente desechable. Almacenar en un lugar seco (<25°C / <77°F). Evitar la exposición a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

Descripción

El apósito Zorflex LA consiste en una tela de carbón activado puro con una capa de baja adherencia aplicada sobre ambos lados. Se trata de un apósito cómodo que mantiene contacto con la superficie de la herida. El apósito Zorflex LA es de color negro a gris. Si bien es posible una variación en el color, esto no afecta su efectividad. Zorflex LA proporciona una eficaz barrera antimicrobiana contra la contaminación microbiana que protege la herida contra los microorganismos invasivos capaces de evitar la curación de la herida. Zorflex LA también es efectivo contra los microorganismos ya presentes en la herida. Las propiedades de la barrera antimicrobiana de la capa de Zorflex® son efectivas durante un mínimo de 7 días. Se ha demostrado que Zorflex® reduce el olor, el dolor y la exudación. Zorflex® es conductivo. Zorflex LA puede utilizarse seco o humedecido con agua esterilizada.

Indicaciones

Zorflex LA está indicado como apósito antimicrobiano de baja adherencia sobre heridas de espesor parcial y total tales como: cavidades y fistulas, trauma, sitios quirúrgicos, carcinomas fungiformes, úlceras de presión, úlceras venosas, úlceras diabéticas, quemaduras, áreas receptoras y donadoras de injerto.

Contraindicaciones

Ninguna.

Precauciones

Utilizar agua esteril para limpiar, irrigar o humedecer la herida. El uso de productos a base de aceites, las pomadas tópicos o la solución salina reducirán la eficacia de Zorflex LA. No reutilizar. Si se lo reutiliza, la eficacia del producto puede deteriorarse y se puede producir contaminación cruzada.

Instrucciones de uso

- Limpiar la herida con agua esteril.
- Cortar el apósito según proceda para que cubra la superficie si la maceración es evidente. No desgarar.
- Aplicar Zorflex LA de cualquiera de los lados sobre la lesión de la herida.
- Asegurar el apósito Zorflex LA sobre la zona interesada utilizando un apósito secundario adecuado o terapia de compresión. Como alternativa, asegurarlo con un vendaje, cinta o lámina de retención de apósitos. En el caso de heridas de alto exudado, es adecuado el uso de un apósito secundario absorbente. Zorflex LA permite la transferencia del exudado al apósito secundario, que deberá ser reemplazado según sea necesario sin alterar el Zorflex LA o el lecho de la herida.
- Si el apósito se adhiere a la herida, humedecer o empañar el apósito con agua esteril para contribuir a su remoción y evitar alteraciones de la herida en sanación.
- Zorflex LA puede dejarse sobre la herida durante 7 días, o según se indique clínicamente. Es posible que se desprendan de la herida algunas fibras o hilos que se desprendan del apósito.
- El dispositivo debe ser utilizado según las especificaciones.
- El producto moet ser utilizado bajo la supervisión pertinente de profesionales de la salud.

Disponibilità del prodotto			
Código	Tamaño	Disponibilidad	
ZLA10	10.5 cm x 10.5cm (4 1/4" x 4 1/4")	Emballado unicamente	
ZLA15	15cm x 25cm (6" x 10")	Emballado unicamente	
ZLA20	20cm x 10cm (8" x 4")	Emballado unicamente	
Fabricante			
Chemvion Carbon Limited, Cloth Division, Rainton Bridge Industrial Estate Houghton-le-Spring, Tyne & Wear, DH4 5PP, GB			
Zorflex® trade mark of Chemvion Carbon.			



Penso primário antimicrobiano para feridas, adsorvente de odores.

Penso primário antimicrobiano e adsorvente de odores. Apenas para utilização única. Guardar em local seco (<25 °C / <77 °F). Evitar exposição a temperaturas acima dos 50 °C/122 °F.

Descrição

O penso Zorflex LA consiste num tecido de carvão ativado puro com uma camada de baixa aderência aplicada de ambos os lados. É um produto confortável que mantém o contacto com a superfície da ferida. O penso Zorflex LA tem uma cor escura e possível que a cor varie, contudo tal não afeta o desempenho. O Zorflex LA proporciona uma barreira antimicrobiana eficaz contra a contaminação microbiana, protegendo a ferida de micro-organismos invasivos que podem impedir a cicatrização da ferida. O Zorflex LA também é eficaz contra micro-organismos já existentes na ferida. As propriedades de barreira antimicrobiana da camada de Zorflex® permanecem eficazes durante um mínimo de 7 dias. O Zorflex® demonstrou reduzir o odor, a dor e a exsudação. O Zorflex® é condutivo. O Zorflex LA pode ser utilizado seco ou humedecido com água esterilizada.

Indicações

O Zorflex LA está indicado como penso antimicrobiano de baixa aderência para aplicação sobre feridas supurativas com uma espessura parcial ou total, como por exemplo: cavidades e fistulas, trauma, locais cirúrgicos, carcinomas fungiformes, úlceras de decúbito, úlceras venosas, úlceras diabéticas, queimaduras, zonas de enertos tanto em doadores como em recetores.

Contraindicações

Nenhuma.

Precauções

Utilize água esteril para limpar, irrigar ou humedecer a ferida. A utilização de produtos à base de óleos, pomadas tópicos ou soro fisiológico diminuirá a eficácia de Zorflex LA. Não reutilizar. Em caso de reutilização o desempenho do produto pode deteriorar-se e pode ocorrer contaminação cruzada.

Instruções de utilização

- Limpe a ferida com água esteril.
- Crite o penso a medida, cubra a zona circundante se existirem evidências de maceração. Não reutilize.
- Aplique Zorflex LA com qualquer dos lados para cima sobre a superfície da ferida.
- Fixe o penso Zorflex LA utilizando um penso secundário ou terapia de compressão. Também pode fixá-lo com uma fita de retenção de penso, adesivo ou ligadura. No caso de feridas muito supuradas, recomenda-se um penso secundário absorvente. O Zorflex LA permite a transferência da supuração para o segundo penso que deverá ser substituído sempre que necessário, uma vez que ateta o Zorflex LA ou o leito da ferida.
- Se o penso secar ou aderir à ferida, humedeca o empape o penso com água esteril para ajudar a remoção e evite a ruptura da cicatrização da ferida.
- O Zorflex LA pode permanecer sobre a ferida até 7 dias, ou de acordo com a indicação clínica. Qualquer fo ou fibra que se solte do penso podem ser facilmente removidos.
- O dispositivo deve ser utilizado apenas conforme especificado.
- O dispositivo apenas deve ser utilizado sob a supervisão relevante de profissionais de saúde.



Antimikrobiel, primær lugtdsorberende sårforbinding.

Antimikrobiel og primær lugtdsorberende forbinding. Kun til engangsbrug. Opbevarer på et tørt sted (< 25 °C / < 77 °F). Undgå udsættelse for temperaturer over 50 °C/122 °F.

Beskrivelse

Zorflex LA forbinding består af et stof med rent aktivt kul, hvor der er påført et svagtlæbende lag på begge sider. Det er en komfortabel forbinding, der opretholder kontakt med såroverfladen. Zorflex LA forbindingen findes i farverne sort til grå, farven kan variere, men det påvirker ikke resultatet. Zorflex LA udgør en effektiv antimikrobiel barriere mod mikrobiel kontaminering og beskytter såret mod invasive mikroorganismer, der kan forhindre såret i at hele. Zorflex LA er også effektivt mod mikroorganismer, der allerede findes i såret. De antimikrobielle egenskaber i Zorflex®-laget forbliver effektive i mindst 7 dage. Det er blevet påvist, at Zorflex® reducerer lugt, smerte og udledning. Zorflex® er ledende. Zorflex LA anvendes enten tør eller fugtet med steriliseret vand.

Indikationer

O Zorflex LA er indikeret som en antimikrobiel svagtlæbende forbinding over væskende sår med delvis og fuld tykkelse såsom: hulrum og fistler, traumer, kirurgiske steder, cancerår, tryksår, venøse sår, diabetiske sår, forbrændinger, graft-steder på både donor og modtager.

Kontraindikationer

