

物料编号: 205-146256			客户物料编号: 2056	
零件名称: 铝制前裙边		版本: 42		
颜色方式: 黑色	油漆颜色: 黑色	数量: 1	日期: 2019	
色卡号: ■ 2056		尺寸: 205	1	
设计	生产商	备注	1/1 请查看其它信息	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



DURAMAX® S

Apósito supersorbente de sílice

Smith+Nephew

Descripción del producto

El apósito supersorbente de sílice es un apósito médico absorbente que proporciona un control eficaz del exudado y un contacto suave con la piel del paciente. El apósito está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de heridas con un exudado de moderado a abundante. La capa superior del apósito está formada por una esponja de sílice que absorbe el exudado de la herida. Una capa de distribución que absorbe el exudado evita que el exudado se acumule y se escape hacia arriba de la capa absorbente. El apósito está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de heridas con un exudado de moderado a abundante. El apósito está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de heridas con un exudado de moderado a abundante. El apósito está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de heridas con un exudado de moderado a abundante.

Indicaciones

El apósito supersorbente de sílice está indicado para heridas que emitan más de un exudado moderado a abundante. El apósito está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de heridas con un exudado de moderado a abundante. El apósito está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de heridas con un exudado de moderado a abundante. El apósito está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de heridas con un exudado de moderado a abundante.

Contraindicaciones

- No utilizar como tratamiento primario sobre lesiones activas o hermanas gálicas.
- No utilizar en heridas con cavidades, ya que el apósito puede adherirse al absorber.

Instrucciones de uso

Aplicación

1. Limpie la zona de la herida siguiendo los procedimientos habituales. Asegúrese de que la piel esté seca y limpia.
2. El producto está diseñado para ser utilizado en heridas con un exudado de moderado a abundante. Seleccione un tamaño de apósito que cubra la totalidad de la herida de modo que quede un margen de 2-3 cm.
3. Retire la película de PE y péguela con cuidado al apósito directamente sobre el lugar de la herida con la capa de sílice del apósito al contacto con la piel.
4. El apósito se puede utilizar sobre la herida con un exudado de moderado a abundante, como un vendaje o como un apósito de cobertura.
5. El apósito puede ser utilizado en el tratamiento de heridas con un exudado de moderado a abundante, como un vendaje o como un apósito de cobertura.

Frecuencia de los cambios de apósito

El apósito puede ser utilizado como un máximo de 3 días, o hasta el momento de su uso, antes de que el exudado de la herida sea suficiente para producir un requerir cambio de apósito.


Usos y precauciones

El apósito puede ser utilizado en la práctica clínica local para defectos cutáneos agudos de recuperación y para el manejo de lesiones de quemaduras y de heridas de cirugía que emita exudado de moderado a abundante.

• No utilizar si el empaque está abierto o dañado.

Product availability	Size	Availability	Contact
6666661121	20cm x 12cm	Carton of 10	Smith+Nephew
6666661132	15cm x 10cm	Carton of 10	Smith+Nephew
6666661143	20cm x 25cm	Carton of 10	Smith+Nephew
6666661154	20cm x 25cm	Carton of 10	Smith+Nephew
6666661165	20cm x 40cm	Carton of 10	Smith+Nephew

SMITH+NEPHEW Medical, Inc.
 Level 2 Zone 9, Daxing Park 15th Street, Suzhou Industrial Park, 215129 Suzhou, China
 UK: Smith+Nephew Ltd, 27 Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3BU
 USA: Smith+Nephew, Inc., 10000 North Central Expressway, Dallas, Texas 75243, USA
 Tel: +353 1 454 4444 Fax: +353 1 454 4445
 Tel: +1 817 381 8888 Fax: +1 817 381 8888
 Email: info@smith-nephew.com usa@smith-nephew.com
 Web: www.smith-nephew.com
 Tel: +41 76 551 11 11 Fax: +41 76 551 11 11
 Email: info@smith-nephew.ch
 Web: www.smith-nephew.ch

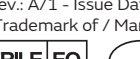

NO utilizar si el envase está dañado





[illegible][illegible][illegible][illegible]



DURAMAX® 5.0

Pomo de silicone superabsorvente



Descrição do produto

O Pomo de Silicone Superabsorvente é um produto altamente eficiente que proporciona conforto e eficiência no tratamento de uma contusão ou uma lesão no pé de um atleta. O produto é aplicado diretamente sobre a lesão para fornecer alívimo imediato. A camada de silicone superabsorvente absorve o excesso de líquido e reduz a dor e o inchaço. O produto é aplicado diretamente sobre a lesão e é deixado em contato com a pele por um período de 24 horas. O produto é aplicado diretamente sobre a lesão e é deixado em contato com a pele por um período de 24 horas.

Indicações

O Pomo de Silicone Superabsorvente é indicado para o tratamento de lesões de contusão e de lesões de estiramento de tendões e ligamentos. O produto é aplicado diretamente sobre a lesão e é deixado em contato com a pele por um período de 24 horas. O produto é aplicado diretamente sobre a lesão e é deixado em contato com a pele por um período de 24 horas.

Contraindicações

Não utilizar com um tratamento primário de uma lesão de contusão ou de lesão de estiramento de tendões e ligamentos. Não utilizar em feridas de qualquer natureza, uma vez que o produto irá absorver qualquer líquido que possa sair da ferida.

Instruções de utilização

1. Lavar a área da ferida de acordo com as indicações médicas.
2. Aplicar o produto diretamente sobre a lesão.
3. O produto está esterilizado antes da aplicação.
4. Não utilizar em feridas abertas ou em feridas com tecido morto.
5. Não utilizar em feridas com tecido morto.
6. Para evitar a contaminação e o risco de infecção, não tocar no produto com as mãos.
7. Não utilizar em feridas com tecido morto.
8. Não utilizar em feridas com tecido morto.


Product availability

Code	Size	Availability
60601111	10cm x 10cm	Carton of 10
60601112	15cm x 10cm	Carton of 10
60601113	20cm x 10cm	Carton of 10
60601114	20cm x 20cm	Carton of 10
60601115	20cm x 40cm	Carton of 10

Smith Nephew Sports Equipment Ltd
 Unit 20 The Dairling Park 201 Sussex Street, London W9 0DQ, United Kingdom
 Tel: +44 (0)20 773 44444 Fax: +44 (0)20 773 44444 Email: sales@smithnephew.com

Winners Health Care, LTD.

10000 Highway 70, Unit 100, Langford, British Columbia, V1M 2B8, Canada
 Tel: +1 (250) 831-8888 Fax: +1 (250) 831-8888 Email: info@winnershealthcare.com
 Tel: +1 (800) 361-1111 Fax: +1 (800) 361-1111 Email: info@winnershealthcare.com

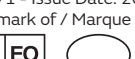






[illegible][illegible][illegible][illegible]





Duramax[®] X3

Medicazione super assorbente in silicone

Indicazioni del prodotto

Medicazione super assorbente in silicone è una medicazione assorbente che fornisce un controllo facile dell'assorbimento e un contatto delicato con la cute. Grazie alla sua struttura in silicone, il prodotto è facile da indossare e da togliere e non si deforma e non si strappa. È inoltre molto resistente all'urto e al calore. Grazie alla sua struttura in silicone, il prodotto è facile da indossare e da togliere e non si deforma e non si strappa. È inoltre molto resistente all'urto e al calore.

Benefici

Medicazione super assorbente in silicone è una medicazione assorbente che fornisce un controllo facile dell'assorbimento e un contatto delicato con la cute. Grazie alla sua struttura in silicone, il prodotto è facile da indossare e da togliere e non si deforma e non si strappa. È inoltre molto resistente all'urto e al calore.

Indicazioni per l'uso

Medicazione super assorbente in silicone è una medicazione assorbente che fornisce un controllo facile dell'assorbimento e un contatto delicato con la cute. Grazie alla sua struttura in silicone, il prodotto è facile da indossare e da togliere e non si deforma e non si strappa. È inoltre molto resistente all'urto e al calore.

Indicazioni per l'uso

Medicazione super assorbente in silicone è una medicazione assorbente che fornisce un controllo facile dell'assorbimento e un contatto delicato con la cute. Grazie alla sua struttura in silicone, il prodotto è facile da indossare e da togliere e non si deforma e non si strappa. È inoltre molto resistente all'urto e al calore.

Avvertenze

Medicazione super assorbente in silicone è una medicazione assorbente che fornisce un controllo facile dell'assorbimento e un contatto delicato con la cute. Grazie alla sua struttura in silicone, il prodotto è facile da indossare e da togliere e non si deforma e non si strappa. È inoltre molto resistente all'urto e al calore.

Precauzioni

Medicazione super assorbente in silicone è una medicazione assorbente che fornisce un controllo facile dell'assorbimento e un contatto delicato con la cute. Grazie alla sua struttura in silicone, il prodotto è facile da indossare e da togliere e non si deforma e non si strappa. È inoltre molto resistente all'urto e al calore.

Confezionamento

Medicazione super assorbente in silicone è una medicazione assorbente che fornisce un controllo facile dell'assorbimento e un contatto delicato con la cute. Grazie alla sua struttura in silicone, il prodotto è facile da indossare e da togliere e non si deforma e non si strappa. È inoltre molto resistente all'urto e al calore.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

RAMPS® S

the super absorbent dressing

Indication

per Absorbent Dressing is an absorbent pad designed for effective occlusive contact skin contact. This dressing is ideal for moderate to heavily exuding wounds. The unique super absorbent dressing can absorb up to 10 times its own weight in wound exudate. The dressing is designed to absorb and lock in wound exudate and prevent it from leaking out. The dressing is designed to be used on the skin and is not intended for use on the skin.

Instructions for Use

Application

1. Clean the wound area in accordance with normal procedures. Ensure the per-wound skin is dry.
2. The product is sterile before use. Do not use if the packaging is damaged. Select a dressing size to overlap the wound edges by at least 2-3cm.
3. Remove the film and then gently apply the dressing directly on the wound side with the adhesive side of the dressing onto the skin.
4. The dressing should be fixed with an adhesive tape. The dressing should be changed if the adhesive tape is damaged or if the adhesive tape is loose.
5. The dressing should be fixed off the skin the second day and remove the dressing.

Frequency of dressing change

The dressing should be changed every 7 days.

[illegible][illegible][illegible]